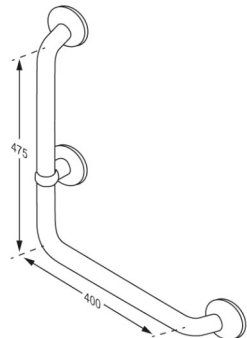




Produkt Produktnummer	PLUS 90° Winkelhaltegriff 400 x 475 mm RT115000
Farbe Produkt- beschreibung	<p> VVS:777567100 NRF:6311217 RSK:8980564 EAN:5708590146270 HMI: 25432 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Weiß </p>  <p> PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegriffösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern. </p> <p> PLUS Winkelgriff 90° - links, Durchmesser 33 mm, A: 400 mm x B: 475 mm, zur Festmontage. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen. Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen. </p>
Produktkapazität	<p> Maximale Belastung: 235 kg. Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet. <i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i> </p>
Materialien Ergonomie	<p> Pulverbeschichtetes Aluminium Abdeckkappen aus Cycloy Kunststoff </p> <p> Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand. </p>



PRESSALIT®

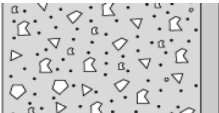



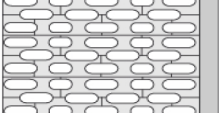

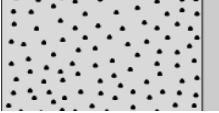

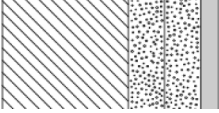

Produkt	PLUS 90° Winkelhaltegriff 400 x 475 mm
Produktnummer	RT115000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

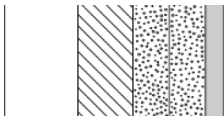
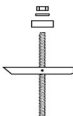

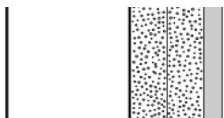
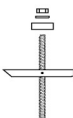

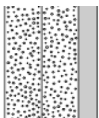

Produkt	PLUS 90° Winkelhaltegriff 400 x 475 mm
Produktnummer	RT115000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Vollziegel >= Mz12 V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden. 
	Porenbeton P4 V8667 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. 



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS 90° Winkelhaltegriff 400 x 475 mm RT115000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (12 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (12 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com