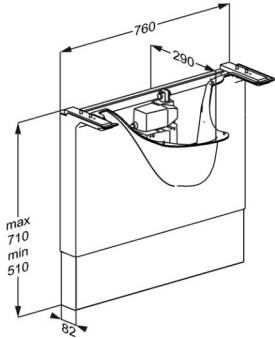




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højderegulerbart R4852000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 654022200 EAN: 5708590340920 HMI: 138112 FDA: ILW/D142473</p>  <p>MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne.</p> <p>MATRIX vaskophæng, venstrevendt, vægmonteret, med hvid installationsinddækning og inkl. skjult til- og afløbssystem. Elektrisk højderegulerbart 200 mm med trykknapper i front af vask. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX ANGLE DEEP håndvaske, R2152/R2153). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	200 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskruer med 60 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.</b></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 11,75 mm/s Hastighed ned: 11,75 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB



<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R4852000
<b>Materialer</b>	Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
<b>Styreboks</b>	CB9 Careline (Linak), IPX6
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>



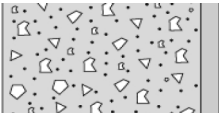
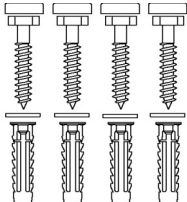

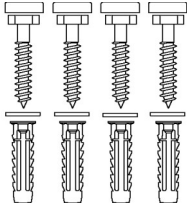
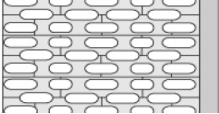
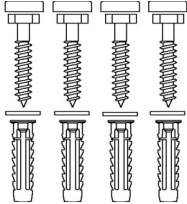
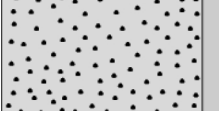
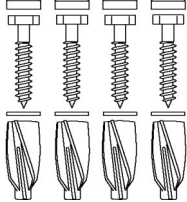
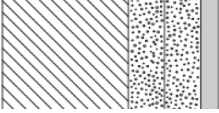
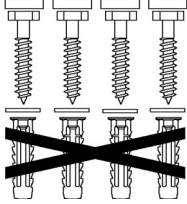
# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R4852000
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

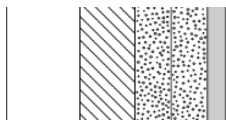
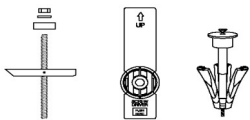
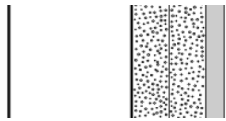
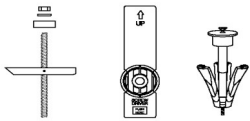
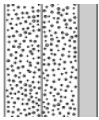
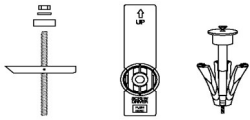


<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R4852000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højderegulerbart R4852000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.