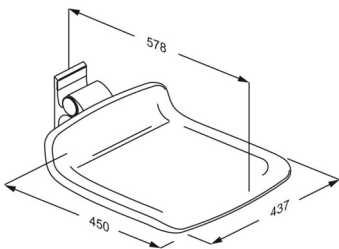




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450, Festmontage R7404000
Farbe	VVS: 777514100 NRF: 6317101 EAN: 5708590359465 HMI: 124480 FDA: INN/D135865 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe, elektrisch höhen- verstellbar als auch manuell verstellbar, mit und ohne Pflegeöffnung sowie wahlweise mit Rücken- und Armlehnen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Duschsitz 450. Zur Festmontage. Sitz ist hochklappbar. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 113 kg. <i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien Ergonomie Funktionen	<p>Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz ist aus PUR-Schaumstoff mit Sperrholzkern hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.</p> <p>Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort.</p> <p>Der Duschsitz ist hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann.</p>



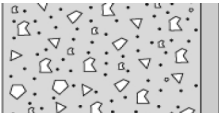
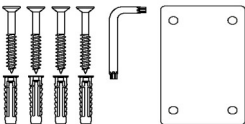

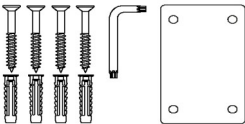
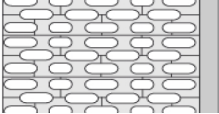
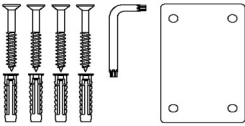
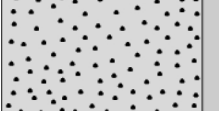
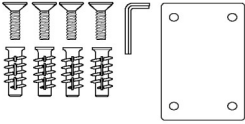
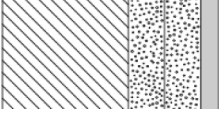
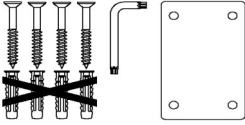
Produkt	PLUS Duschsitz 450, Festmontage
Produktnummer	R7404000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitz und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

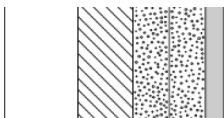
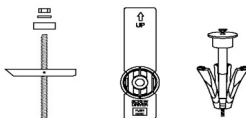
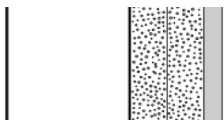
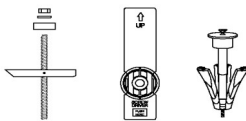
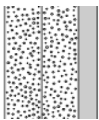

Produkt	PLUS Duschsitz 450, Festmontage
Produktnummer	R7404000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25</p> <p>V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Vollziegel >= Mz12</p> <p>V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12</p> <p>V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Porenbeton P4</p> <p>V8654 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</p> <p>V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450, Festmontage R7404000
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</p> <p>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.</p> 

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 Tel.: +45 8788 8788
 Fax: +45 8788 8789
 E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®