



(EN) Mounting instruction

(DK) Monteringsvejledning

(DE) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(PL) Instrukcja montażu

(NL) Montage-voorschrift

(SV) Monteringsanvisning


(NO) Monteringsveiledning

(ES) Instrucciones de montaje

(FI) Asennusohje

Subject to alteration without further notice. Ret til ændringer forbeholdes. · Recht auf Änderungen sind vorbehalten. · Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. · Wijzigingen voorbehouden. · Rätten till ändringar förbehålles. · Vi forbeholder oss rett til endringer. · Salvo variaciones. Podlega zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. · Pidätämme oikeuden muutoksiin.



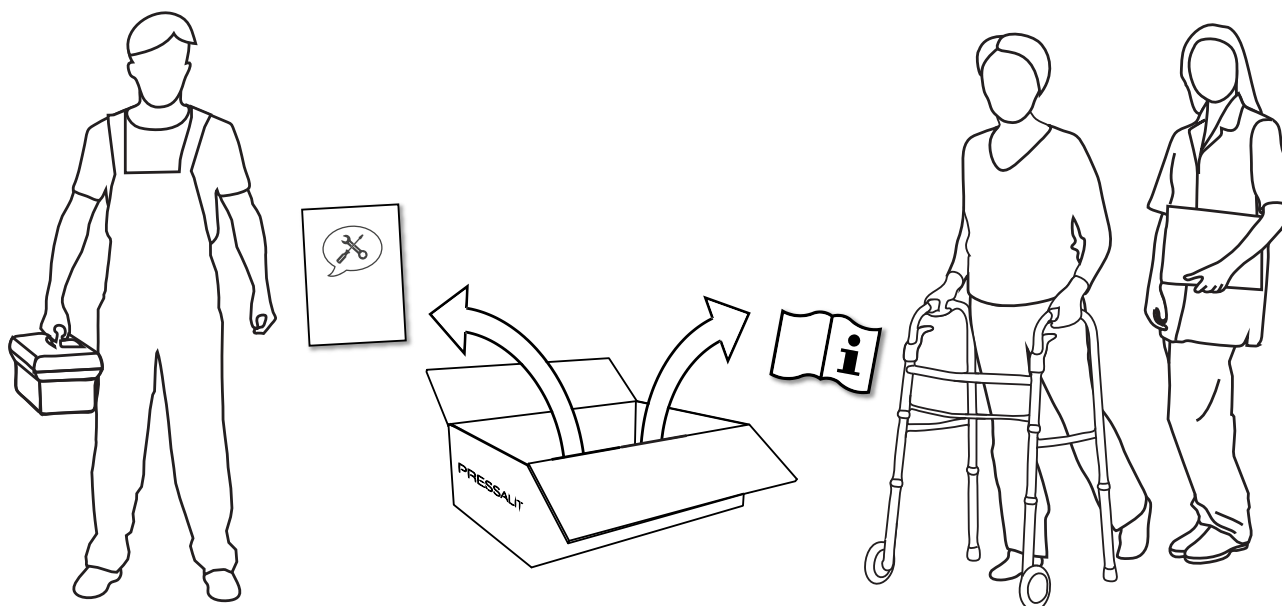

- (EN) Operation and maintenance manual (OMM) for this product is enclosed in the box. Please hand over to the user. It can also be downloaded at pressalit.com.
- (DK) Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen til dette produkt er vedlagt i emballagen. Giv den videre til brugeren. Den kan også downloades på pressalit.com.
- (DE) Eine Gebrauchsanweisung mit Informationen zu Bedienung und Wartung ist im Lieferumfang enthalten. Händigen Sie diese dem Benutzer aus. Diese kann auch von der Website pressalit.com heruntergeladen werden.
- (FR) Le manuel d'utilisation et de maintenance de ce produit est inclus dans l'emballage. Veuillez le remettre à l'utilisateur. Il est également téléchargeable sur le site pressalit.com.
- (NL) De gebruiks- en onderhoudshandleiding voor dit product wordt in de doos meegeleverd. U wordt verzocht dit aan de gebruiker te overhandigen. Deze kan ook op pressalitcare.com worden gedownload.
- (SV) Användar- och underhållsmanualen för denna produkt medföljer i förpackningen. Ge den till användaren. Den går även att ladda ned på pressalit.com.
- (NO) Bruks- og vedlikeholdsanvisning for dette produktet følger med i boksen. Gi den til brukeren. Den kan også lastes ned fra pressalit.com.
- (ES) El manual de uso y mantenimiento de este producto está incluido en la caja. Asegúrese de entregarlo al usuario. También se puede descargar desde pressalit.com.
- (PL) Instrukcja obsługi i konserwacji dla tego wyrobu znajduje się w pudełku. Prosimy przekazać ją użytkownikowi. Można ją również pobrać ze strony pressalit.com.
- (FI) Tuotteen käyttö- ja huolto-opas on pakkauksessa. Luovuta se käyttäjälle. Sen voi ladata myös osoitteesta pressalit.com.

EN Mounting Instruction

Please read and carefully follow these instructions. Find the product number on the product label and ensure that these assembly instructions match your product.

WARNING: Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury or the product being damaged.



WARNING: If you suspect that any individual parts may be damaged, contact your Pressalit dealer or service provider. Do not remove, attempt to repair or install parts yourself, unless directed to do so by Pressalit or its agents.

WARNING: No modification of this equipment is allowed without express authorization from Pressalit.

WARNING: These instructions must be followed, and the product must be installed professionally by a qualified person; e.g. a licensed plumber, in order to avoid personal injury or property damage while using the product.

WARNING: Pressalit cannot be held liable for injury to persons or damage to property caused by faulty mounting.

Installation location

This product is designed for indoor use in wet environments, such as in a bathroom. Ensure that the following requirements for the installation location are met:

Environmental factor	Operating range
Temperature	-30°C to 80°C (-22°F to 176°F)
Relative humidity	20% to 90% @ 30°C (86°F) (condensation free)
Atmospheric pressure	700 to 1060 hPa

WARNING: Special precautions must be taken when using medical electrical equipment.

Electromagnetic compatibility (EMC):



It is very unlikely that the user will experience problems with the product due to insufficient electromagnetic compatibility. However, electromagnetic immunity is always relative, and the standards are based on defined environments of use. Portable and mobile RF communication equipment may affect medical electrical equipment.

When the product is connected to the local mains power supply, it is recommended to use electromagnetic shielding and take appropriate measures to avoid conducted emissions.

When choosing an installation location, ensure that there will be adequate space for movement of—and access to—the product.

Assembly and installation

Mount the product in accordance with the illustrations in this assembly instruction.



WARNING: External cables need to be fixed in such a way that users cannot stumble and injure themselves.

When using the product's nurse call button, ensure that the connected equipment complies with the applicable electrical safety regulations in its country of use.

DK Monteringsvejledning

Sørg for at læse og følge disse anvisninger omhyggeligt. Se produktnummeret på produktmærkaten, og kontroller, at denne monteringsvejledning gælder for dit produkt.



ADVARSEL! Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre ulykker og eventuel alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL! Hvis du har mistanke om, at en eller flere dele er beskadiget, skal du kontakte din Pressalit-forhandler eller serviceleverandør. Du må ikke selv fjerne, forsøge at reparere eller installere nogen dele, medmindre du er blevet bedt om det af Pressalit eller Pressalits repræsentanter.

ADVARSEL! Du må ikke foretage ændring af dette udstyr uden Pressalits udtrykkelige tilladelse.

ADVARSEL! Denne monteringsvejledning skal følges, og produktet skal monteres fagmæssigt korrekt af en kvalificeret person, f.eks. en autoriseret VVS-installatør, således at der ikke kan ske personskade eller skade på materiel ved brug af produktet.

ADVARSEL! Pressalit kan ikke drages til ansvar for skader på personer eller materiel som følge af fejlmontering.

Installationssted

Dette produkt er konstrueret til indendørs brug i våde omgivelser, såsom på et badeværelse. Sørg også for, at nedenstående krav til installationsstedet er opfyldt:

Omgivelser	Brugsområde
Temperatur	-30°C til 80°C
Relativ luftfugtighed	20-90 % ved 30 °C (uden kondensering)
Atmosfærisk tryk	700-1060 hPa



ADVARSEL! Der skal træffes særlige forholdsregler ved brug af elektromedicinsk udstyr.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

Det er meget usandsynligt, at brugeren vil opleve problemer med produktet som følge af utilstrækkelig elektromagnetisk kompatibilitet. Elektromagnetisk immunitet er dog altid relativ, og standarderne tager udgangspunkt i fastlagte brugsmiljøer. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektromedicinsk udstyr.

Når produktet er tilsluttet det lokale lysnet, anbefales det at anvende elektromagnetisk afskærmning og tage tilsvarende forholdsregler for at undgå ledningsbårne emissioner.

Sørg for at installere produktet et sted med nem adgang til produktet og tilstrækkelig plads til at justere det.

Samling og montering

Monter produktet i henhold til illustrationerne i denne monteringsvejledning.



ADVARSEL! Udvendige ledninger skal fastgøres på en sådan måde, at brugerne ikke risikerer at falde over dem og komme til skade.

Ved brug af produktets tilkaldeknop, skal man sørge for, at det tilsluttede udstyr overholder de gældende elektriske sikkerhedsregler i landet, hvor det anvendes.

DE Montageanleitung

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und folgen Sie ihnen. Suchen Sie die Produktnummer auf dem Produktetikett und versichern Sie sich, dass diese Montageanleitung für Ihr Produkt bestimmt ist.

ACHTUNG: Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Unfällen mit ernsthaften Personenschäden oder zu Produktschäden führen.

ACHTUNG: Falls Sie den Verdacht haben, dass einzelne Teile beschädigt sein könnten, wenden Sie sich an Ihren Pressalit-Händler oder -Dienstleister. Versuchen Sie nicht eigenständig, Teile zu entfernen, zu reparieren oder zu installieren, außer wenn Sie von Pressalit oder seinen Vertretern dazu aufgefordert wurden.



ACHTUNG: Es sind keine Modifizierungen an der Ausrüstung ohne ausdrückliche Genehmigung von Pressalit erlaubt.

WARNUNG: Diese Anweisungen sind unbedingt zu befolgen, und das Produkt muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden, z. B. einem zugelassenen Installateur, damit Verletzungen oder Beschädigungen bei der Verwendung des Produkts vermieden werden.

WARNUNG: Pressalit übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Aufstellort

Dieses Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen mit feuchter Umgebung, wie z. B. in einem Badezimmer, vorgesehen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die folgenden Anforderungen an den Aufstellort erfüllt sind:

Umgebungsfaktoren	Operating range
Temperatur	-30°C bis 80°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 90 % bei 30°C (kondensationsfrei)
Luftdruck	700 bis 1060 hPa

ACHTUNG: Bei der Verwendung von medizinischen elektrischen Geräten sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):



Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Benutzer aufgrund unzureichender elektromagnetischer Verträglichkeit Probleme mit dem Produkt erlebt. Die elektromagnetische Störfestigkeit ist jedoch stets relativ, und die Normen basieren auf festgelegten Nutzungsumgebungen. Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können medizinische elektrische Geräte beeinträchtigen.

Ist das Produkt an das lokale Stromnetz angeschlossen, wird empfohlen, eine elektromagnetische Abschirmung zu verwenden und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um leitungsgebundene Emissionen zu vermeiden.

Bei der Wahl des Aufstellungsorts achten Sie bitte darauf, dass das Produkt gut zu erreichen ist und dass ausreichend Platz vorhanden ist, um das Produkt zu verstellen.

Montage und Installation

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen in der Montageanleitung.



ACHTUNG: Freiliegende Kabel müssen so fixiert sein, dass die Benutzer nicht darüber fallen und sich verletzen können.

Beim Verwenden des Pflegerufknopfs des Produkts stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät den geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften in seinem jeweiligen Verwendungsland entspricht.

FR Notice de montage

Veuillez lire attentivement et respecter les présentes instructions. Repérez la référence du produit sur l'étiquette et assurez-vous que la présente notice de montage correspond à votre produit.

ATTENTION : le non-respect de cette notice peut entraîner des accidents induisant des blessures corporelles graves ou l'endommagement du produit.

ATTENTION : si vous pensez que des pièces individuelles ont pu être endommagées, contactez votre revendeur ou prestataire de service Pressalit. Ne tentez pas de déposer, de réparer ou d'installer des pièces par vous-même, sauf indication contraire de la part de Pressalit ou de ses agents.



ATTENTION : aucune modification ne peut être apportée à cet équipement sans l'autorisation expresse de Pressalit.

AVERTISSEMENT : Ces instructions doivent être respectées et le produit doit être installé par un professionnel qualifié (un plombier agréé, par exemple), afin d'éviter toute risque de blessures corporelles ou de dommages matériels lors de l'utilisation de ce produit.

AVERTISSEMENT : Pressalit ne saurait être tenu responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels dus à un montage défectueux.

Emplacement d'installation

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur dans des environnements humides, tels qu'une salle de bains. Veillez également à ce que les exigences suivantes concernant l'emplacement d'installation soient respectées :

Facteur environnemental	Plage de fonctionnement
Température	-30°C à 80°C
Humidité relative	20 % à 90 % à 30 °C (sans condensation)
Pression atmosphérique	700 à 1 060 hPa

ATTENTION : Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation d'équipements électriques médicaux.

Compatibilité électromagnétique (CEM) :

Il est très peu probable que l'utilisateur rencontre des problèmes avec le produit en raison d'une compatibilité électromagnétique insuffisante. Cependant, l'immunité électromagnétique reste toujours relative, et les normes se fondent sur des environnements d'utilisation définis. Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent perturber les équipements électriques médicaux.



Lorsque le produit est raccordé au réseau électrique local, il est recommandé d'utiliser un blindage électromagnétique et de prendre des mesures appropriées afin d'éviter les émissions conduites.

Lors du choix d'un emplacement d'installation, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace autour du produit pour le manipuler et y accéder.

Montage et installation

Montez le produit conformément aux illustrations de présente notice de montage.



ATTENTION : les câbles externes doivent être fixés de telle manière que les utilisateurs ne puissent pas trébucher et se blesser.

Lors de l'utilisation du bouton d'appel infirmier du produit, assurez-vous que l'équipement connecté est conforme aux réglementations de sécurité électrique applicables dans son pays d'utilisation.

NL Montage-voorschrift

Lees deze montage-voorschrift grondig door en volg de aanwijzingen nauwkeurig. Controleer het productnummer op het productlabel en verzeker u ervan dat deze montage-voorschrift past bij uw product.

WAARSCHUWING: Als de montage niet volgens deze handleiding wordt uitgevoerd, kan dit ernstig persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Neem contact op met de Pressalit-dealer of -onderhoudsdienst als u vermoedt dat onderdelen van het product beschadigd zijn. Probeer nooit zelf onderdelen te repareren of te vervangen tenzij u hiertoe uitdrukkelijk bent geïnstrueerd door Pressalit of haar vertegenwoordigers.

WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen aan in het product tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Pressalit.

WAARSCHUWING: Deze instructies moeten worden opgevolgd en het product moet door een gekwalificeerd persoon op professionele wijze worden geplaatst, bijvoorbeeld door een bevoegde loodgieter, om persoonlijk letsel of materiële schade tijdens gebruik van het product te voorkomen.

WAARSCHUWING: Pressalit is niet verantwoordelijk voor letsel bij personen of materiële schade veroorzaakt door foutieve montage.

Plaats van installatie

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een natte ruimte, zoals een badkamer. Zorg er ook voor dat aan de volgende eisen voor de installatielocatie wordt voldaan:

Milieufactor	Gebruiksbereik
Temperatuur	-30°C tot 80°C
Relatieve vochtigheid	20% tot 90% @ 30°C (condensvrij)
Atmosferische druk	700 tot 1060 hPa

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van medische elektronische apparatuur moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC):

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gebruiker problemen ondervindt met het product als gevolg van onvoldoende elektromagnetische compatibiliteit. Elektromagnetische immuniteit is echter altijd relatief en de normen zijn gebaseerd op gedefinieerde gebruiksomgevingen. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan van invloed zijn op medische elektronische apparatuur.

Wanneer het product is aangesloten op het lokale elektriciteitsnet, wordt aanbevolen om elektromagnetische afscherming toe te passen en passende maatregelen te nemen om geleide emissies te voorkomen.

Zorg bij de keuze van de plaats van montage voor voldoende toegangs- en bewegingsruimte rond het product.

Montage en installatie

Bevestig het product zoals aangegeven in de illustraties in deze montage-voorschrift.

WAARSCHUWING: Externe kabels moeten zodanig worden bevestigd dat gebruikers van het product er niet over kunnen struikelen.

Bij het gebruik van de verpleegoproepknop van het product, zorg ervoor dat het aangesloten apparaat voldoet aan de geldende elektrische veiligheidsvoorschriften in het land van gebruik.

SV Monteringsanvisning

Läs och följ dessa monteringsanvisningar noga. Leta upp produktnumret på produktens etikett och kontrollera att dessa monteringsanvisningar gäller denna produkt.



WARNING: Om inte anvisningarna följs kan detta resultera i olyckor såsom allvarliga personskador eller skador på produkten.
WARNING: Om du misstänker att några komponenter blivit skadade, ska Pressalit-återförsäljare eller servicecenter kontaktas. Ta inte bort, försök reparera eller installera delar själv utom på uppmaning av Pressalit eller dess representant.
WARNING: Inga ändringar får utföras på denna utrustning utan uttryckligt medgivande av Pressalit.
WARNING: De här instruktionerna måste följas och produkten måste installeras av en behörig person (t.ex. en rörmokare) för att undvika person- eller materialskador när produkten används.
WARNING: Pressalit tar inget ansvar för person- eller materialskador som uppstår på grund av felaktig installation.

Installationsplats

Den här produkten är avsedd för inomhusbruk i våta utrymmen, såsom i ett badrum. Kontrollera även att följande krav för installationsplatsen är uppfyllda:

Miljöfaktorer	Arbetsområde
Temperatur	-30°C till 80°C
Relativ fuktighet	20 till 90 % vid 30 °C (kondensationsfri)
Lufttryck	700 till 1060 hPa



WARNING: Vid användning av medicinsk elektrisk utrustning krävs särskilda försiktighetsåtgärder.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
Det är mycket osannolikt att användaren upplever problem med produkten på grund av otillräcklig elektromagnetisk kompatibilitet. Elektromagnetisk immunitet är dock alltid relativ, och standarder bygger på definierade användningsmiljöer. Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektrisk utrustning.

När produkten är ansluten till det lokala elnätet rekommenderas elektromagnetisk avskärmning och lämpliga åtgärder för att undvika ledningsbundna emissioner.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att manövrera och komma åt produkten när installationsplatsen väljs.

Montering och installation

Montera produkten enligt illustrationerna i dessa monteringsanvisningar.



WARNING: Externa kablar måste fästas så att det inte går att snubbla på dem och skada sig.

När du använder produkten's sjuksköterskeutropsknapp, se till att det anslutna utrustningen överensstämmer med de tillämpliga elektriska säkerhetsföreskrifterna i dess användningsland.

NO Monteringsveiledning

Les og følg disse instruksjonene nøye. Finn produktnummeret på produktetiketten, og kontroller at disse monteringsveiledningene stemmer overens med produktet.



ADVARSEL: Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til ulykker med alvorlig personskade eller skader på produktet.

ADVARSEL: Hvis du har mistanke om at noen av enkeltdelene er ødelagt, må du kontakte nærmeste Pressalit- forhandler eller -tjenesteleverandør. Du må ikke fjerne, prøve å reparere eller installere deler selv, med mindre du har fått beskjed om det av Pressalit eller Pressalits representanter.

ADVARSEL: Det er ikke tillatt å gjøre endringer på dette utstyret uten uttrykkelig tillatelse fra Pressalit.

ADVARSEL: Disse instruksjonene må følges, og produktet må installeres av en kvalifisert fagperson, f.eks. en autorisert rørlegger, for å unngå personskade eller materiell skade når produktet brukes.

ADVARSEL: Pressalit kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle personskader eller materielle skader som måtte oppstå grunnet feil montering.

Installeringssted

Dette produktet er beregnet for innendørs bruk i våte omgivelser, for eksempel på et bad. Sørg også for at følgende krav til installeringsstedet er oppfylt:

Miljøfaktor	Operating range
Temperatur	-30°C til 80°C
Relativ fuktighet	20 % til 90 % ved 30 °C (kondensfritt)
Atmosfærisk trykk	700 til 1060 hPa

ADVARSEL: Bruk av medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

Det er svært lite sannsynlig at brukeren vil oppleve problemer med produktet på grunn av utilstrekkelig elektromagnetisk kompatibilitet. Elektromagnetisk immunitet er imidlertid alltid relativ, og standardene bygger på definerte bruksmiljøer. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr.

Når produktet er koblet til det lokale strømnettet, anbefales det å benytte elektromagnetisk skjerming og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre ledningsbårne emisjoner.

Når du velger installeringssted, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass for flytting av – og tilgang til – produktet.

Montering og installering

Monter produktet i henhold til illustrasjonene i denne monteringsveiledningen. Koble produktets komponenter – den håndholdte styreenheten, motoren, kontrollboksen og strømkabelen. Sørg for at kontaktene er trykket så langt inn som mulig i de tilhørende holderne.

Tilkobling til strømnettet

Det finnes en rekke mulige konfigurasjoner når du skal koble produktet til strømnettet.



ADVARSEL: Eksterne kabler må festes slik at brukerne ikke kan snuble og skade seg.

Når du bruker produktets sykepleievarsling-knapp, sørg for at det tilkoblede utstyret overholder de gjeldende elektriske sikkerhetsforskriftene i sitt bruksland.

ES Instrucciones de montaje

Lea y preste atención a estas instrucciones. Busque la referencia del producto en la etiqueta y asegúrese de que estas instrucciones de montaje son las correctas.



ADVERTENCIA: No respetar estas instrucciones puede dar lugar a accidentes, lesiones personales graves o daños al producto.

ADVERTENCIA: Si alguna de las piezas parece estar dañada, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor de servicios de Pressalit. No desmonte, trate de reparar ni instale piezas personalmente, a menos que Pressalit o alguno de sus agentes así se lo indique.

ADVERTENCIA: Se prohíbe modificar este equipo sin autorización expresa por parte de Pressalit.

ADVERTENCIA: Deben cumplirse las siguientes instrucciones y el producto debe ser instalado por un fontanero profesional cualificado para evitar daños personales o materiales durante la utilización del producto.

ADVERTENCIA: Pressalit no asume ninguna responsabilidad por daños a personas ni daños materiales provocados por una instalación defectuosa.

Lugar de instalación

Este producto está diseñado para uso en interiores en entornos húmedos, como un baño. Asegúrese también de que se cumplan los siguientes requisitos para el lugar de instalación:

Condición ambiental	Rango de funcionamiento
Temperatura	-30°C a 80°C
Humedad relativa	20 % a 90 % @ 30 °C (sin condensación)
Presión atmosférica	700 a 1060 hPa

ADVERTENCIA: Se deben tomar precauciones especiales al utilizar equipos médicos eléctricos.

Compatibilidad electromagnética (EMC):

Es muy poco probable que el usuario experimente problemas con el producto debido a una compatibilidad electromagnética insuficiente. No obstante, la inmunidad electromagnética siempre es relativa, y las normas se basan en entornos de uso definidos. Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles pueden afectar a los equipos médicos eléctricos.



Cuando el producto está conectado a la red eléctrica local, se recomienda emplear un blindaje electromagnético y tomar medidas adecuadas para evitar emisiones conducidas.

A la hora de elegir un lugar de instalación, asegúrese de que exista espacio suficiente para que el producto se mueva y sea posible acceder al mismo.

Montaje e instalación

Monte el producto de acuerdo con las ilustraciones que incluyen estas instrucciones de montaje. Conecte los componentes del producto (unidad de control manual, motor, cuadro de control y cable de alimentación). Asegúrese de introducir los conectores de modo que penetren completamente en sus correspondientes tomas.

Conexión a la red eléctrica

Existen diferentes formas de conectar el producto a la red eléctrica.



ADVERTENCIA: Los cables externos deben fijarse de tal modo que los usuarios no puedan tropezar con ellos ni sufrir lesiones.

Når du bruger sygeplejerskekaldsknappen på produktet, skal du sikre dig, at det tilsluttede udstyr overholder de elektriske sikkerhedsforskrifter, der gælder i dit brugsland.

PL Instrukcja montażu

Prosimy o przeczytanie i dokładne przestrzeganie tej instrukcji. Znajdź numer wyrobu na etykiecie wyrobu i sprawdź, czy ta instrukcja montażu pasuje do Twojego wyrobu.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do wypadków powodujących poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia wyrobu.



OSTRZEŻENIE: Jeżeli podejrzewasz, że jakiekolwiek części mogą być uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem firmy Pressalit. Nie usuwaj, nie próbuj naprawiać ani montować części samodzielnie, chyba że otrzymasz takie polecenie od firmy Pressalit lub jej przedstawicieli.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w tym urządzeniu bez wyraźnego upoważnienia firmy Pressalit.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia podczas użytkowania wyrobu, należy przestrzegać tych instrukcji, a wyrób musi być zamontowany profesjonalnie przez wykwalifikowanego specjalistę, np. licencjonowanego hydraulika.

OSTRZEŻENIE: Firma Pressalit nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia spowodowane nieprawidłowym montażem.

Miejsce montażu

Wyrób jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience. Upewnij się również, że zostały spełnione poniższe wymagania dotyczące miejsca montażu:

Czynnik środowiskowy	Zakres roboczy
Temperatura	od -30°C do 80°C (od -22°F do 176°F)
Wilgotność względna	od 20% do 90% przy temp. 30°C (86°F) (bez skraplania)
Ciśnienie atmosferyczne	od 700 do 1060 hPa

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z elektrycznego sprzętu medycznego należy zachować szczególne środki ostrożności. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):



Ryzyko wystąpienia problemów z produktem z powodu niewystarczającej kompatybilności elektromagnetycznej jest bardzo niskie. Odporność elektromagnetyczna jest jednak pojęciem względnym, a normy opierają się na zdefiniowanych środowiskach użytkowania. Przenośny i mobilny sprzęt komunikacji radiowej (RF) może zakłócać działanie elektrycznego sprzętu medycznego.

W przypadku podłączenia produktu do lokalnej sieci zasilającej zaleca się stosowanie ekranowania elektromagnetycznego oraz odpowiednich środków zapobiegawczych w celu uniknięcia emisji przewodowych.

Przy wyborze miejsca montażu należy upewnić się, że zapewni ono odpowiednią przestrzeń na przesuwanie wyrobu i dostęp do niego.

Montaż i instalacja

Zamontuj wyrób zgodnie z ilustracjami w tej instrukcji montażu. Połącz elementy wyrobu ze sobą: pilot przewodowy, silnik, skrzynkę sterowniczą i przewód zasilania tak jak pokazano na rysunku. Sprawdź, czy wtyczki są maksymalnie mocno wciśnięte w odpowiednie gniazda.

Podłączanie do sieci zasilającej

Istnieje wiele potencjalnych konfiguracji podłączania wyrobu do sieci zasilającej.



OSTRZEŻENIE: Przewody zewnętrzne należy zamocować tak, aby użytkownicy nie mogli się o nie potknąć i zranić.

Podczas korzystania z przycisku wezwania pielęgniarki produktu, upewnij się, że podłączony sprzęt spełnia odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego obowiązujące w danym kraju.

FI Asennusohje

Lue nämä ohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Etsi tuotenumero tuotteen tarrasta ja varmista, että nämä asennusohjeet vastaavat tuotettasi.

VAROITUS: Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla onnettomuus, joka johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai tuotteen vaurioitumiseen.



VAROITUS: Jos epäilet, että jotkin yksittäiset osat ovat vaurioituneet, ole yhteydessä Pressalit-myyjääsi tai huoltokumppaniin. Älä poista taikka yritä korjata tai asentaa osia itse, ellei Pressalit tai sen edustaja ole nimenomaisesti niin ohjeistanut.

VAROITUS: Tätä tuotetta ei saa muuntaa ilman Pressalitin nimenomaista valtuutusta.

VAROITUS: Näitä ohjeita on noudatettava, ja pätevän henkilön, esimerkiksi putkiasentajan, on asennettava tuote ammattimaisesti, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingoilta tuotetta käytettäessä.

VAROITUS: Pressalit ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat viallisesta asennuksesta.

Asennuspaikka

Tuote on suunniteltu sisäkäyttöön kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen. Varmista myös, että seuraavat asennuspaikkaa koskevat vaatimukset täyttyvät:

Ympäristötekijä	Käyttöalue
Lämpötila	-30°C – 80 °C
Suhteellinen kosteus	20–90 % 30 °C:ssa (ei kosteuden tiivistymistä)
Ilmanpaine	700–1 060 hPa

VAROITUS: Lääkinnällisten sähkölaitteiden käytössä on noudatettava erityisiä varotoimia.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC):

On hyvin epätodennäköistä, että käyttäjällä ilmenee ongelmia tuotteen kanssa riittämättömän sähkömagneettisen yhteensopivuuden vuoksi. Sähkömagneettinen immuuteetti on kuitenkin aina suhteellista, ja standardit perustuvat määriteltäviin käyttöympäristöihin. Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuusviestintälaitteet voivat vaikuttaa lääkkinnällisiin sähkölaitteisiin.



Kun tuote on liitetty paikalliseen sähköverkkoon, suositellaan sähkömagneettista suojausta ja asianmukaisia toimenpiteitä johtuvien päästöjen estämiseksi.

Asennuspaikkaa valittaessa on varmistettava, että tuotteella on riittävästi liikkumatilaa ja että tuotteeseen pääsyyn jää riittävästi tilaa.

Kokoaminen ja asennus

Asenna tuote tässä asennusohjeessa näytettyjen kuvien mukaisesti. Kytke laitteen osat – käsiohjain, moottori, ohjausrasia ja virtajohto – toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että liittimet on painettu mahdollisimman pitkälle vastakkeisiinsa.

Liitäntä verkkovirtaan

Laitteen voi liittää verkkovirtaan useilla eri tavoilla.



VAROITUS: Ulkoiset kaapelit on kiinnitettävä siten, että käyttäjät eivät voi kompastua ja vahingoittaa itseään.

Käytettäessä tuotteen hoitajakutsun painiketta varmista, että kytketty laitteisto noudattaa sovellettavia sähköturvallisuusmääräyksiä sen käyttömaassa.

(EN) Ingress protection rating: IPX6

Water projected in powerful jets—from a nozzle size up to 12.5 mm/0.49" — against the product from any direction shall have no harmful effects.

(DK) Kapslingsklasse: IPX6

Kraftige vandstråler rettet mod produktet – fra en dysestørrelse på op til 12,5 mm – medfører ingen skader.

(DE) Schutzart: IPX6

Strahlwasser – aus einer Düse mit der maximalen Größe von 12,5 mm – aus allen Richtungen auf das Produkt darf keinen schädlichen Einfluss haben.

(FR) L'indice de protection: IPX6

De l'eau projetée sur le produit en jets puissants, à l'aide d'une buse de 12,5 mm au maximum, dans n'importe quel sens n'aura aucun effet préjudiciable.

(PL) Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem wody: IPX6

Brak szkodliwych skutków działania strumieni wody pod dużym ciśnieniem – z dyszy o średnicy do 12,5 mm – wyrzucanych na produkt z dowolnego kierunku.

(NL) IP-Codering: IPX6

Krachtige waterstralen - uit openingen met een diameter tot 12,5 mm - die op het product worden gericht, mogen er geen schade aan veroorzaken.

(SV) Kapslingsklassning: IPX6

Spoltät – klarar spolning från ett munstycke med upp till 12,5 mm diameter mot produkten från vilket håll som helst.

(NO) IP kapslingsgraden: IPX6


Kraftig vannspyling – fra munnstykker med en størrelse på opptil 12,5 mm – mot produktet fra en hvilken som helst retning skal ikke ha noen skadelig innvirkning.

(ES) Grado de protección IP: IPX6


El producto soporta la proyección de agua desde cualquier dirección en chorros intensos con una boquilla de hasta 12,5 mm sin sufrir efectos perjudiciales.


(FI) Vesisuojauksen luokitus: IPX6

Vedellä, joka ruiskutetaan tehokkaista suihkupäistä suuttimen koon ollessa enintään 12,5 mm tuotetta kohti mistä tahansa suunnasta, ei saa olla haitallisia vaikutuksia.

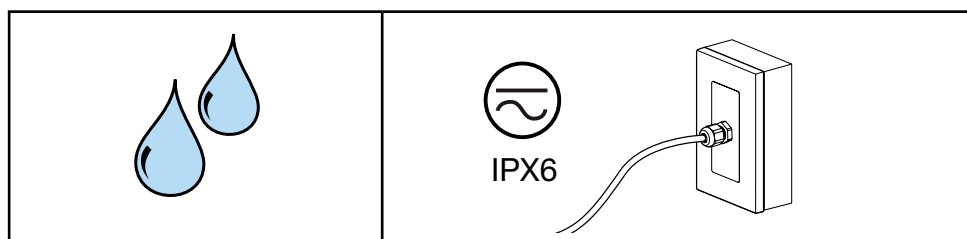


R1197 R1198	Max P	U	Max I
	185 W	125V	1.5A

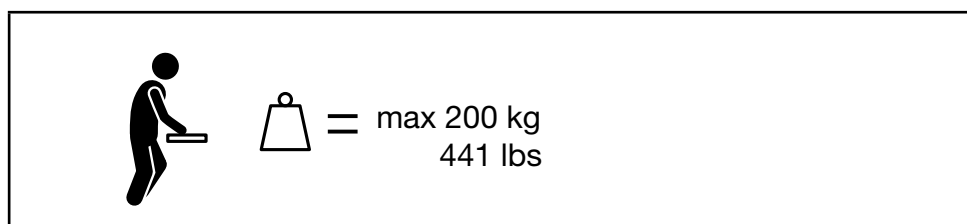


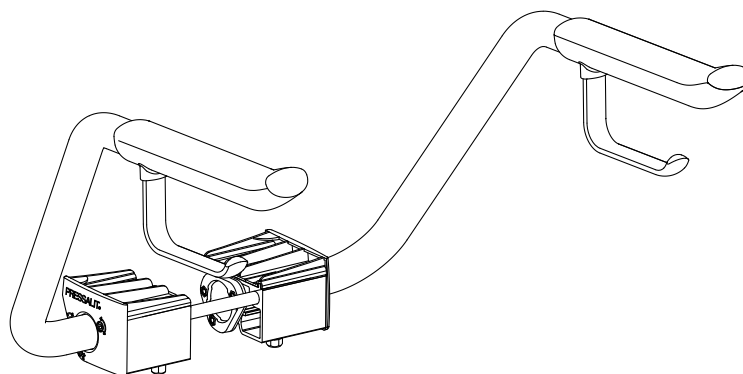



R1196, R1199 (AU)

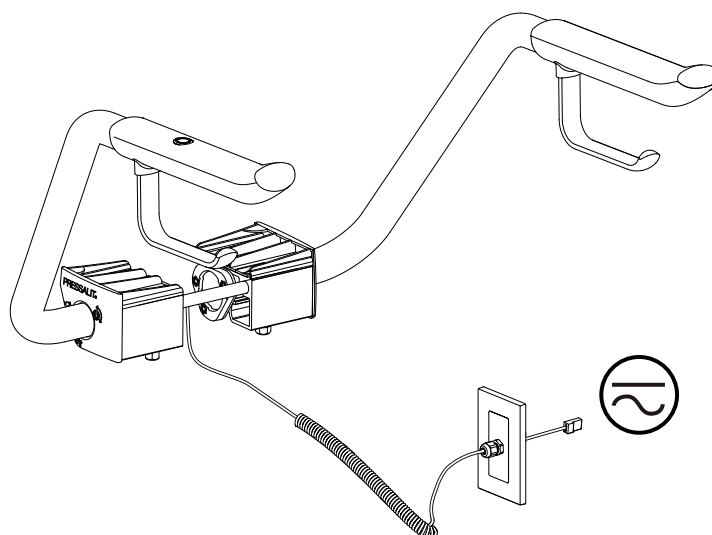

R1197 (AU)

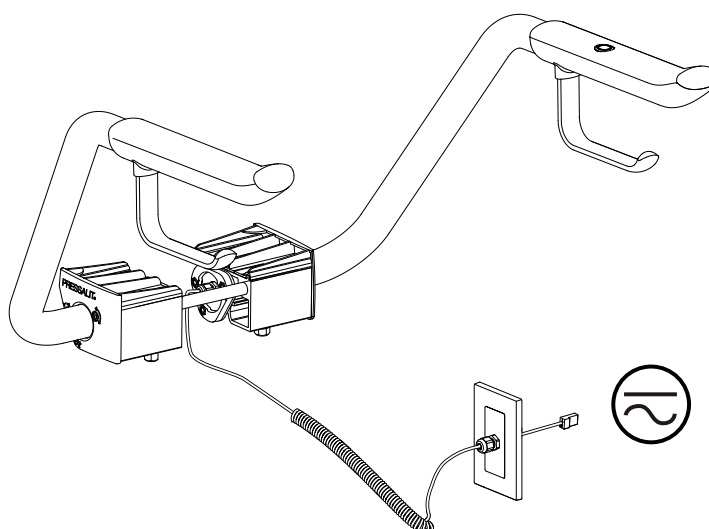



R1198 (AU)

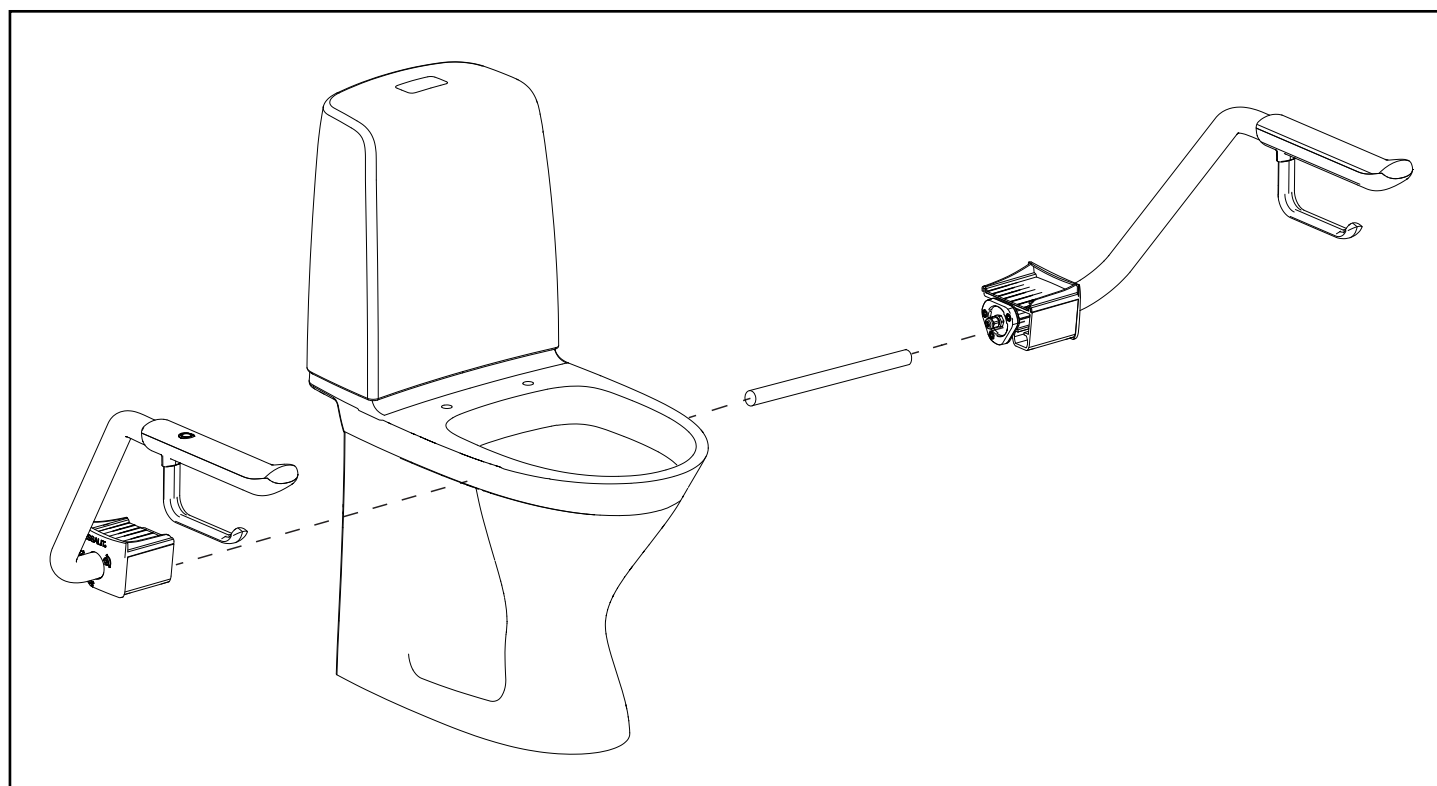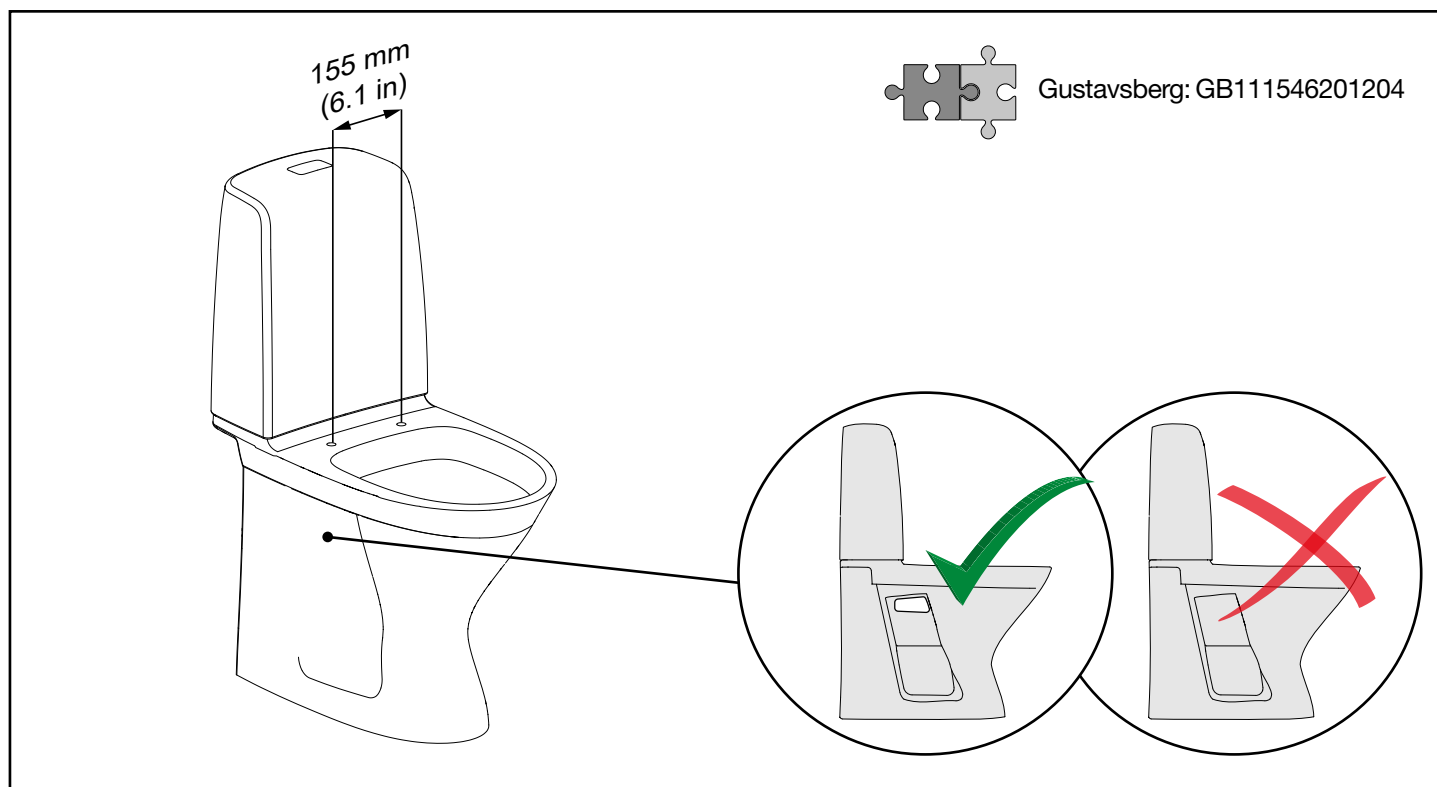

R1196
R1197
R1198
R1199

PRESSALIT®


2026-01-27 Page 16/19

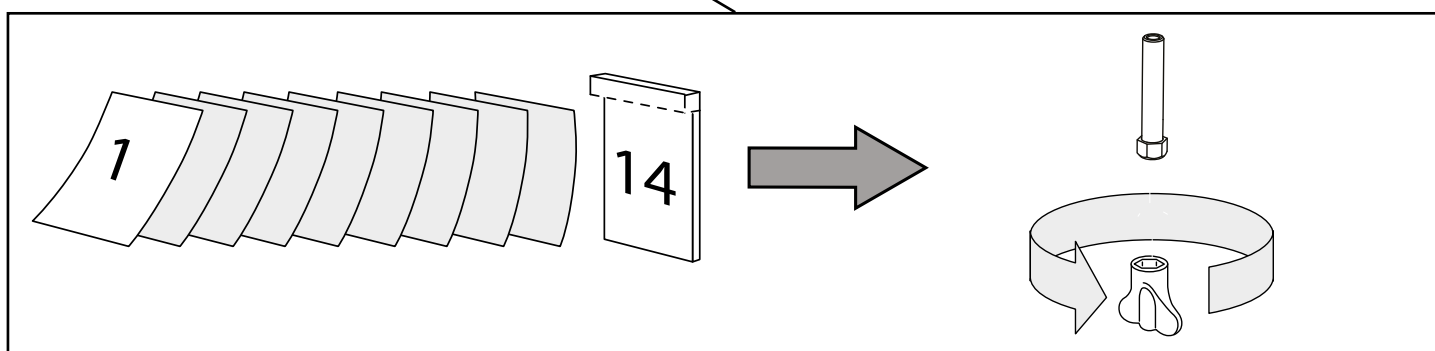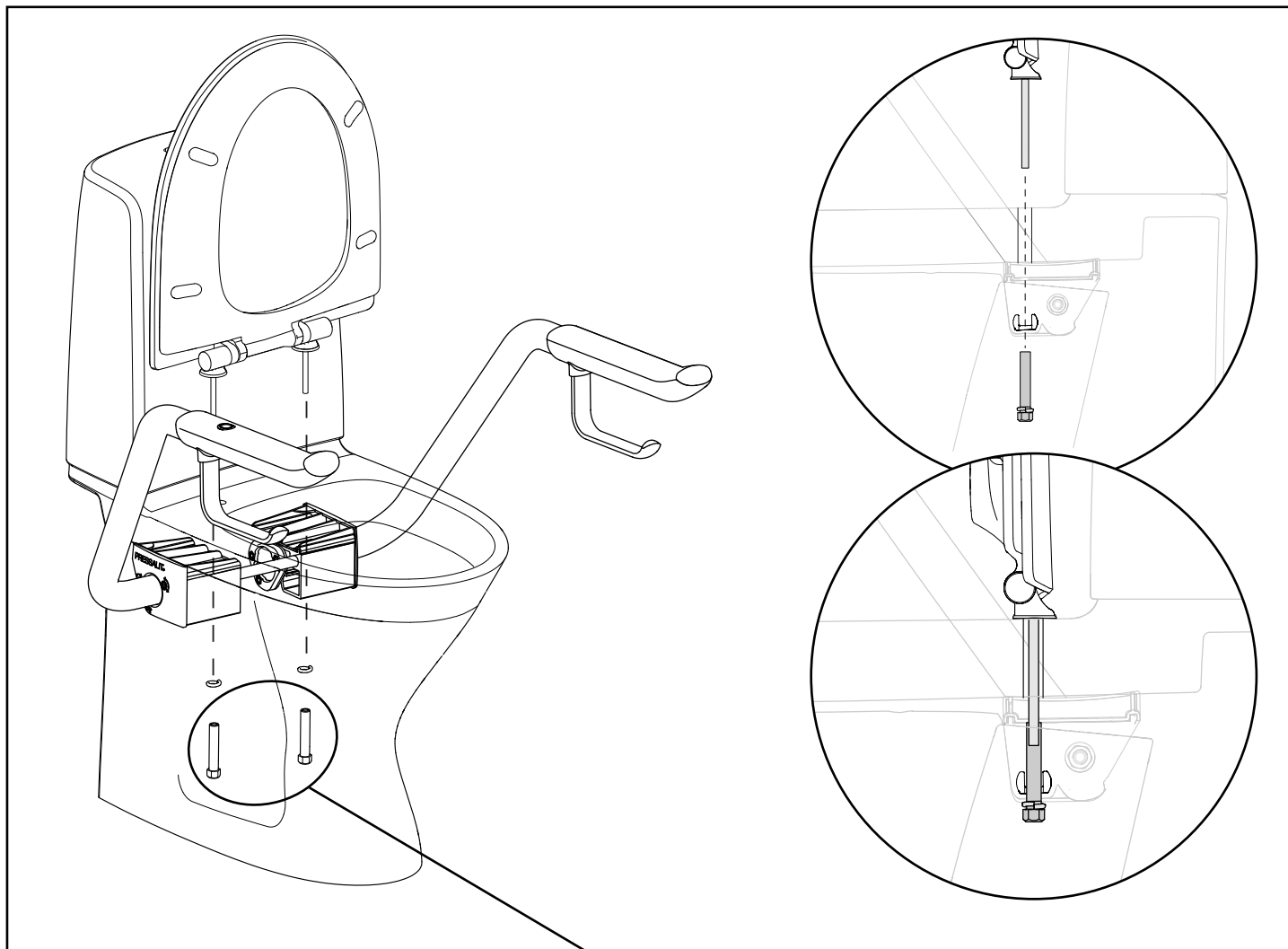

R1196
R1197
R1198
R1199


PRESSALIT®

2026-01-27 Page 17/19

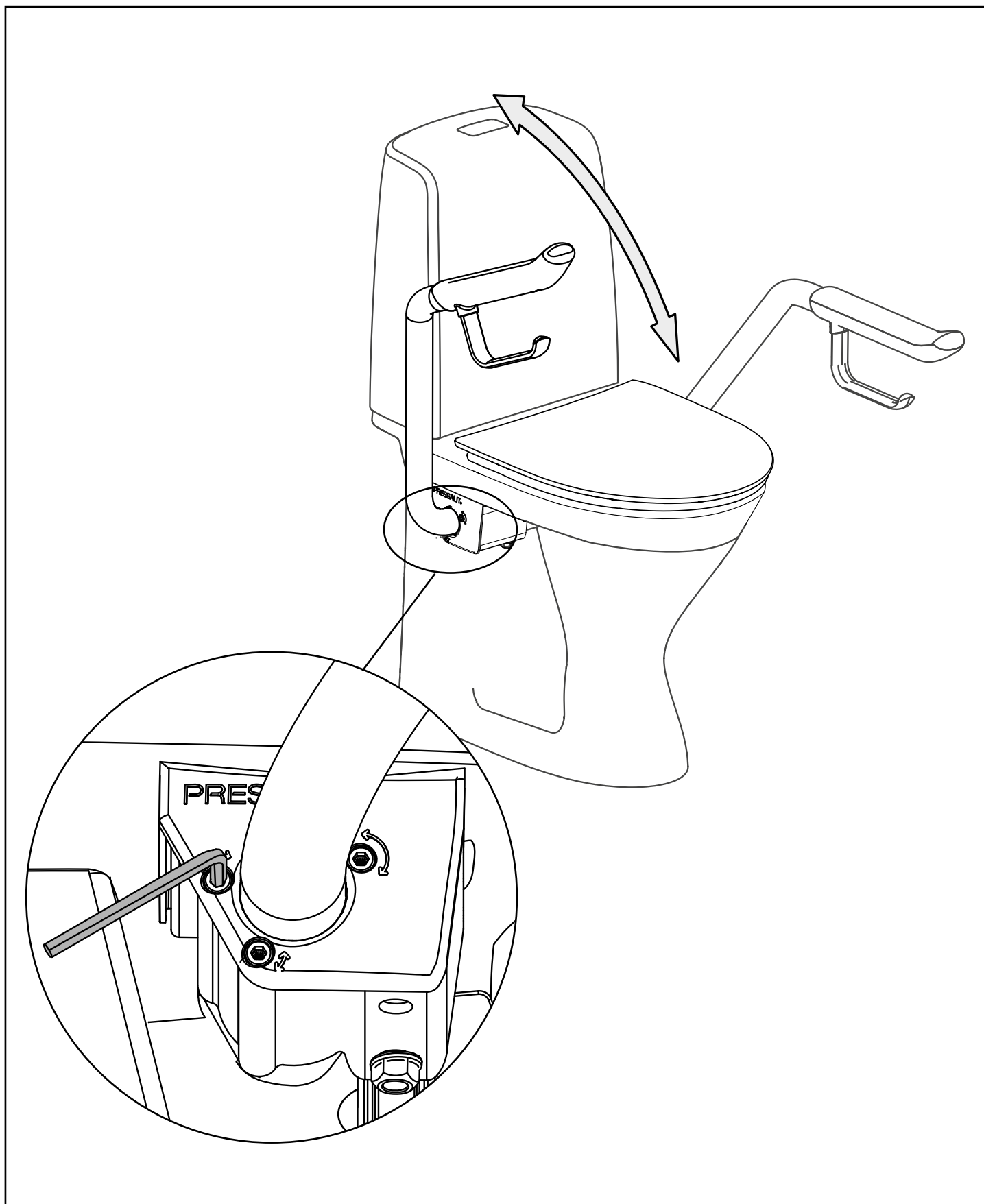

R1196
R1197
R1198
R1199

R1197, R1198

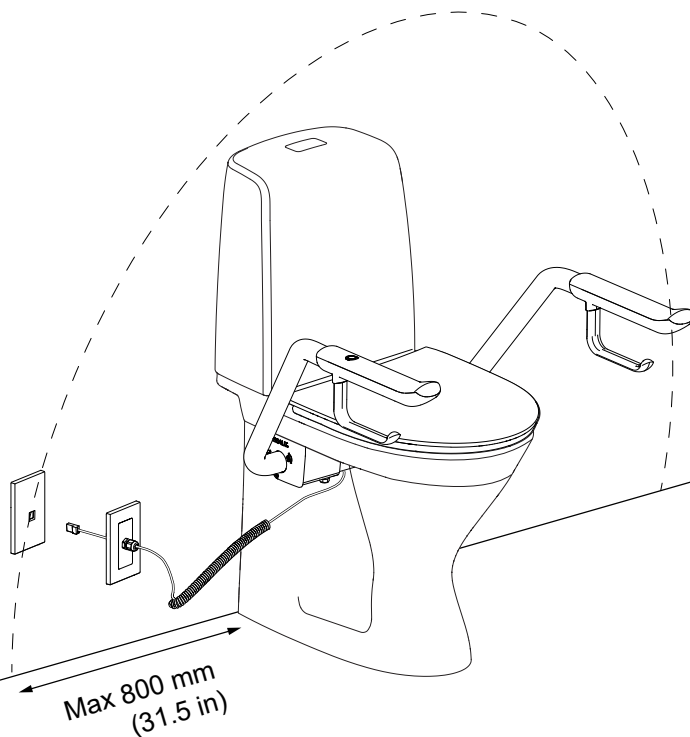

R1196
R1197
R1198
R1199

