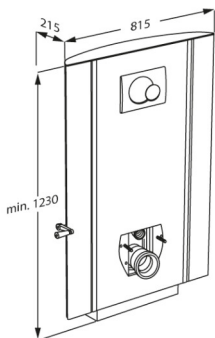




|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                       | SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb<br>R8112112   |
| <b>Farve</b>  | VVS:617991512<br>NRF:6191037<br>EAN:5708590345369<br>HMI: 105969<br>FDA:IKX/D319729<br>Antracitgrå   |
| <b>Produktbeskrivelse</b>   |  <p>Det handler om daglig brug. Om at gøre det så let som muligt at komme på og af toilettet. Det handler om at lette arbejdet for plejeren og om at gøre det bekvemt og værdigt for borgeren.</p> <p>SELECT TL2 toiletløfter, 300 mm manuelt højderegulerbar med håndsvingsbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L.<br/>Toilet-kumme og toiletsæde skal bestilles separat.<br/>De indbyggede lodrette sideprofiler muliggør eftermontering af PLUS toiletstøtter.<br/>Til gulv afløb.<br/>Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS).<br/>Ekskl. monteringskrue til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b><br><b>Produktkapacitet</b> | Højderegulerbar<br>300 mm<br>Maksimal brugervægt: 200 kg.<br>Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør).<br>Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringskrue med 65 kg.<br><i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>   |
| <b>Materialer</b><br><b>Ergonomi</b>                                      | Anodiseret aluminium.<br>Frontpladerne er i polystyren.<br>Topplade i kompartmentlaminat.<br><i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1 og ISO 8191-2). Testrapport tilgængelig.</i><br>Toiletløfteren fås i tre forskellige farver, der alle harmonerer med det moderne badeværelse og er med til at give et behageligt og indbydende toiletmiljø. Et minimalt antal riller, slidser og huller gør rengøringen hurtig og effektiv og giver samtidig et smukt og eksklusivt design.   |

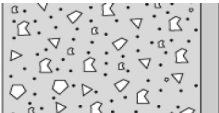
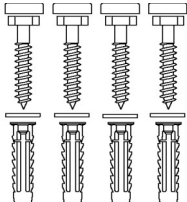

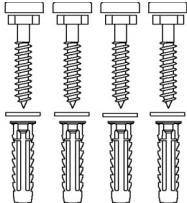
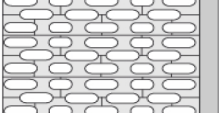
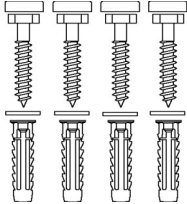
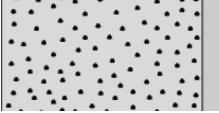
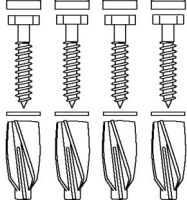
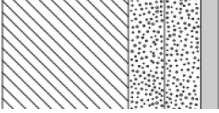
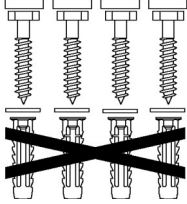


|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>    | SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb   |
| <b>Varenummer</b> | R8112112   |
| <b>Funktioner</b> | Toilettet hæves og sænkes med håndsvinget. Håndsvinget kan placeres på begge sider af løfteren – helt uden brug af værktøj. Det er muligt at højdejustere toiletløfteren ved hjælp af boremaskine som alternativ til håndsvinget. Toilettet kan højdejusteres 300 mm fra 425 til 725 mm, så højden altid kan tilpasses perfekt til mobilitetshjælpemidler som f.eks. kørestol.   |
| <b>Garanti</b>    | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.   |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b><br/>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |

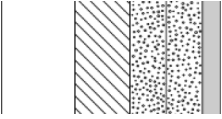
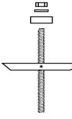

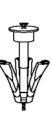
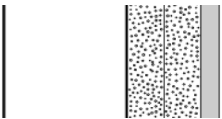
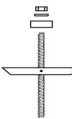


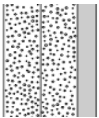



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>    | SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb |
| <b>Varenummer</b> | R8112112   |

## Montering i forskellige vægtyper

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.  |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= H1z12</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.  |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.   |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>   | SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb<br>R8112112   |   |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |    |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.  |    |

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.