



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS hoekhandgreep 762 x 475 mm RT124112
Kleur	VVS:777568212 NRF:6311225 RSK:8980579 EAN:5708590318752 HMI: 25425 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Antracietgrijs
Beschrijving	 PLUS toiletsteunen zijn hoogwaardige producten en kunnen op talloze manieren worden gecombineerd. De Plus toiletsteunen bieden de finishing touch voor het inrichten van een functionele en flexibele badkamer. Een betrouwbare oplossing met veel verschillende opties, welke eenvoudig de basis kan leggen voor meer onafhankelijkheid. PLUS hoekhandgreep, diameter 33 mm, omkeerbaar rechts/links A: 762 mm x B: 475 mm, voor vaste montage. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreepvast te houden Inkl. muur rozet, die de bevestigingen bedekt. Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Product capaciteit	Maximale belasting: 235 kg. Wanneer de handgreep wordt belast met 235 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 56 kg. <i>Handgrepen worden getest met een 1,5 veiligheidsfactor in overeenstemming met de eisen in ISO 17966:2016.</i>
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycloy kunststof
Ergonomy	Door de diameter van 33 mm kan de handgreep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden.



PRESSALIT®

Product	PLUS hoekhandgreep 762 x 475 mm
Artikelnummer	RT124112
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

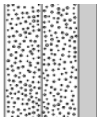
Product	PLUS hoekhandgreep 762 x 475 mm
Artikelnummer	RT124112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8667 - Bevestigingsmateriaal, 12 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS hoekhandgreep 762 x 475 mm RT124112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (12 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (12 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com