



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel. R4950112	
Kleur	VVS: 654005112 NRF: 6132542 RSK: 7508074 EAN: 5708590322414 HMI: 82618 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracietgrijs	
Beschrijving	SELECT wastafel muurframe, staand. Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningshendel. Aanbeveling: flexibel aanvoer/afvoersysteem. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafels). Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wandtypes. SELECT wastafel muurframe, staand. Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningshendel. Aanbeveling: flexibel aanvoer/afvoersysteem. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafels). Wij adviseren sifon R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Excl. bevestigingsmateriaal. Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen (PS). Excl bevestigingsset.	
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 300 mm	



Product Artikelnummer	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel. R4950112
Product capaciteit	Maximale belasting: 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 18 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 171 kg leunend op de voorzijde van de wastafel m.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 21 mm/s Speed down mm: 21 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Geanodiseerd aluminium. De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS). De bovenplaat en compact laminaat. <i>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.</i>
Ergonomy	Het strikte en zuivere ontwerp van de afdekplaat/lift en de gladde oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en aantrekkelijk om naar te kijken. Ze helpen ook bij het garanderen van een goede hygiëne in de badkamer. De exclusieve aluminium profielen zijn licht, duurzaam en elegant om naar te kijken.
Funktie	De wastafel wordt omhoog of omlaag gebracht met behulp van de bedieninghendel aan het uiteinde van de wastafel. De hendelbediening kan aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst en dient ook als handdoekhouder. De bediening van de hendel zijn sterk genoeg om als extra ondersteuning te worden gebruikt.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



Product	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel.
Artikelnummer	R4950112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.




PRESSALIT®

Product	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel.
Artikelnummer	R4950112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

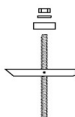

Product Artikelnummer	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel. R4950112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.