



Product Artikelnummer	SELECT wastafel muurframe,staand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie R4953112
Kleur	VVS:654005412 NRF:6132453 EAN:5708590350288 HMI: 105958 FDA:ILW/D142473 Antracietgrijs
Beschrijving	<p>SELECT support wastafel muurframe, staand. Elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel, incl. veiligheids stop functie. Aanbeveling: flexible aansluitset R2065. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (Aanbevolen bij MATRIX SMALL and MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafel). Excl. bevestigingset. zie technische handleiding (pdf) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wandtypes.</p> <p>SELECT wastafel muurframe, staand. Elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel, incl veiligheidsstopfunctie. Aanbeveling: flexibele aan-en afvoerset R2065. Incl bevestigingsbouten voor wastafel(Aanbevolen bij MATRIX SMALL en MATRIX Curve / New Curve wastafels. Wij adviseren sifon R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen (PS). Excl bevestigingsset.</p>
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 300 mm



Product Artikelnummer	SELECT wastafel muurframe,staand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie R4953112
Product capaciteit	Maximale belasting: 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 18 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 171 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 21 mm/s Speed down mm: 21 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Geanodiseerd aluminium. De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS).De bovenplaat en compact laminaat. <i>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.</i>
Ergonomy	Het strakke en pure design plus het gladde oppervlak zijn eenvoudig schoon te maken en aantrekkelijk om te zien, en zorgen voor een goede hygiëne in de badkamer. De exclusieve aluminium zijprofielen zijn licht, duurzaam en elegant.
Functie	De wastafel wordt omhoog of omlaag versteld met behulp van de afstandbediening aan kabel of de hefboom control aan het uiteinde van de wastafel. De hendelbediening kan aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst en dient tevens als handdoekhouder. De hendelbediening is voldoende sterk om als extra ondersteuning te gebruiken. De wastafel is verstelbaar over 300 mm - van 670 tot 970 mm boven de vloer.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



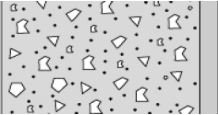
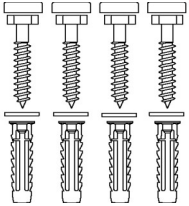

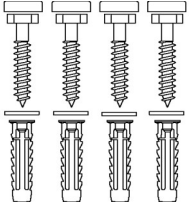
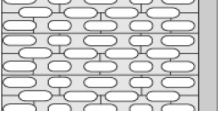
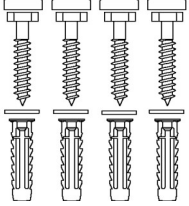
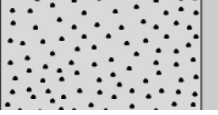
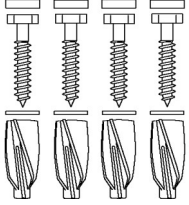
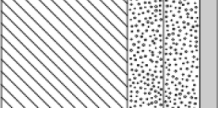
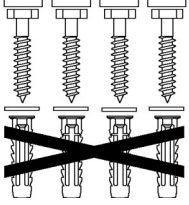
Product	SELECT wastafel muurframe,staand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie
Artikelnummer	R4953112
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek. "</p>
Conformiteitsverklaring	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen- Machinerichtlijn 2006/42/EEG- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



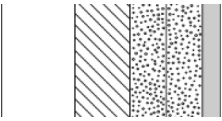
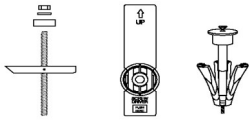
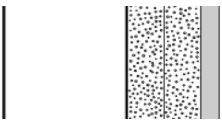
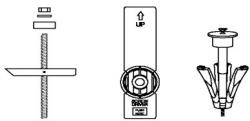
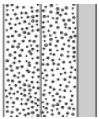
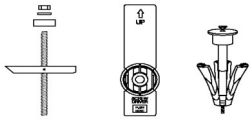
PRESSALIT®

Product	SELECT wastafel muurframe, stand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie
Artikelnummer	R4953112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	SELECT wastafel muurframe,stand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie R4953112
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.