




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ, manuellt sido reglerbar R4560
<b>Färg</b>	VVS:654001300 NRF:6132444 EAN:5708590309408 HMI: 106242 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Ljusgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS upphängning till tvättställ, sidoreglerbart. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065/R2067. Material: Aluminium och plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Sidoreglerbar  Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 97 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 151 kg belastar tvättstället.</i>
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

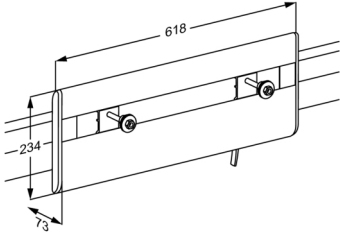

<b>Product</b>	PLUS upphängning till tvättställ, manuellt sido reglerbar
<b>Varunummer</b>	R4560
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklARATION</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.