




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MCT 3 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar R9632719000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS: 777542330 RSK: 8565089 EAN: 5708590389936 HMI: 139819</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>MCT 3 mobiele aankleedtafel, 700 x 1900 mm, twee uitklapbare zijpanelen. Elektrisch in hoogte 500 mm verstelbaar, van 450 tot 950 mm, met afstandsbediening. Matras apart te bestellen. Let op: De MCT 3 moet worden aangesloten op een hoofdvoeding om de hoogteverstellingsfunctie te kunnen gebruiken.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	500 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikersbelasting (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 205 kg. <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 512,5 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 17 mm/s Speed down mm: 17 mm/s
Noise level	50 dB
Materialen	Plastic, Compact Density Fiberboards (CDF) en gepoedercoat staal.

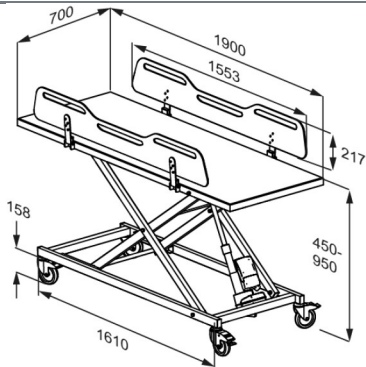

Product	MCT 3 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R9632719000
Ergonomy	<ul style="list-style-type: none">• De ergonomisch ontworpen veiligheidsrails hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, verschonen en aankleden van de gebruiker.• Met één hand te bedienen veiligheidsrails stelt de verzorger in staat om zowel oogcontact als fysiek contact met de gebruiker te houden gedurende het hele proces. De opvouwbare veiligheidsrails bieden ook eenvoudige toegang vanaf alle vier de zijden van de douche en aankleedtafel.• De uitgespaarde handgrepen in de veiligheidsrails stellen gebruikers in staat te helpen bij het draaien, wat fysieke training stimuleert.• Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.
Funktie	<ul style="list-style-type: none">• De mobiele aankleedtafel kan van kamer naar kamer worden verplaatst voor eenvoudig transport en meerdere gebruikers.• Intuïtieve, gebruiksvriendelijke neerklapbare veiligheidsrails met bediening met één hand.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 (Linak) IPX6
Control box	CA30 (Linak) IPX6
Wired remote control	HB30 (Linak) IPX6
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 280 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.



Product	MCT 3 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R9632719000
Reiniging	<p>Gebruik een vochtige, uitgewrongen doek en een mild zeepsop, zoals universele reinigingsoplossing, om het product te reinigen. Na het reinigen is het essentieel om het product droog te vegen met een droge, zachte doek. Deze stap is cruciaal om te voorkomen dat de materialen verkleuren. Daarnaast helpt het tegen slijtage van de verf op het oppervlak.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p>
WEEE	<p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>



PRESSALIT®

Product	MCT 3 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R9632719000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®