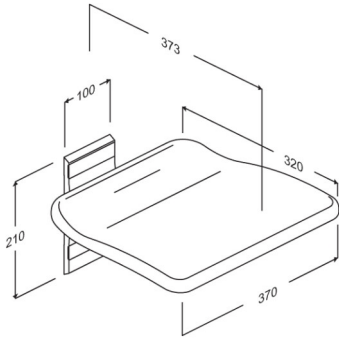




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS klapsæde R5504000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777531400 EAN: 5708590370583 HMI: 130163  Klapsædet er ideelt, hvor der er behov for en ekstra siddeplads, og hvor pladsen er minimal. Dette kan typisk forekomme i rum, hvor der ofte er behov for hvile - f.eks. i køkkenet, elevatoren, korridoren eller til en af- og påklædning i badeværelset. Klapsædet bør ikke anvendes i bruseområdet. PLUS klapsæde, automatisk opklappeligt. Fast højde, til vægmontering. Materialer: Aluminium, hærdplast og kunststof. Ekskl. monteringsskruer til væg
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt: 435 kg. Når sædet belastes med 435 kg, belastes hver monteringsskrue med 199 kg. Bemærk at en brugervægt på 435 kg kan kræve en forstærket væg til fastmontering. En brugervægt på op til 262 kg vil kunne monteres på en normal væg alt efter vægtype, hvis du følger vores befæstningsvejledning. Når sædet belastes med 262 kg, belastes hver monteringsskrue med 120 kg. <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Ergonomi Funktioner	Ergonomisk udformet sæde, der giver god og behagelig støtte. Sædet klapper automatisk op når det ikke anvendes, så det ikke optager unødigt plads.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

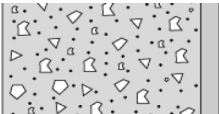
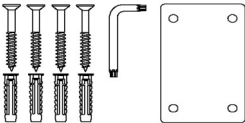
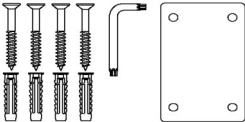
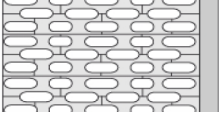
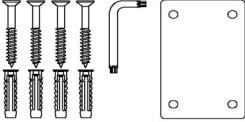
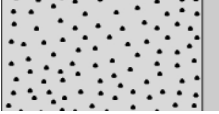
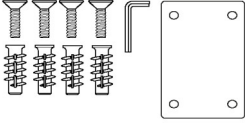
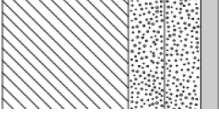
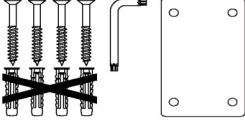
Produkt	PLUS klapsæde
Varenummer	R5504000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



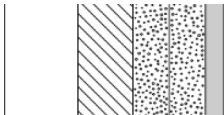
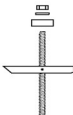
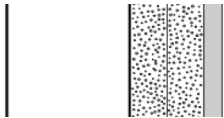
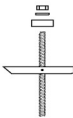
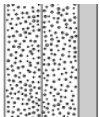
PRESSALIT®

Produkt	PLUS klapsæde
Varenummer	R5504000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkedede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkedede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkedede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8654 - Monteringssæt, 4 stk undersænkedede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkedede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	PLUS klapsæde R5504000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		