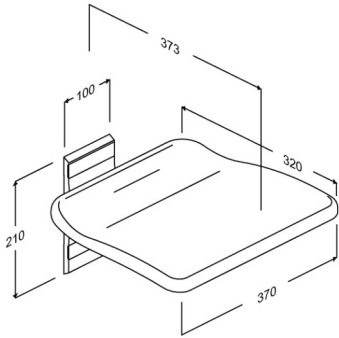




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS uppfällbar sits, fast höjd R5510112
Färg	VVS:777531012 NRF:7501002 RSK:8565072 EAN:5708590321332 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Antracitgrå
Beskrivning	 Den uppfällbara sitsen är perfekt när det finns behov för extra sittplats och i minimala utrymmen. Dessa förekommer vanligtvis i rum där det ofta finns behov av att vila sig - t.ex. i köket, hissen, korridoren eller på- och avklädning i badrummet. Klappsits bör inte användas direkt i duschen. PLUS uppfällbar sits, fast höjd. Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Max brukarvikt: 435 kg När sitsen belastas med 435 kg, belastas varje fästskruv med 199 kg. Observera att en användarvikt på 435 kg kan kräva en förstärkt vägg för en säker installation. En användarvikt på upp till 262 kg kan installeras på en standardvägg, beroende på väggtyp, förutsatt att våra installationsanvisningar följs. När sitsen belastas med 262 kg belastas varje fästskruv med 120 kg. <i>PLUS uppfällbara sitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Det uppfällbara sits är tillverkad av hårdplast, och monterings- och upphängningsfästet är tillverkat av 10 my anodiserat aluminium. Ändkåporna är tillverkade av ABS-plast. Ett ergonomiskt utformat säte som ger ett bra och bekvämt stöd. Sitsen kan fällas undan när den inte används – eller för att frigöra utrymme. Står upp av sig själv när den är undenfälld.



PRESSALIT®

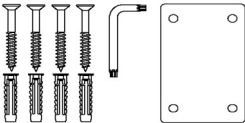
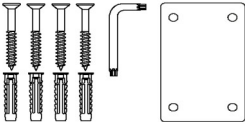
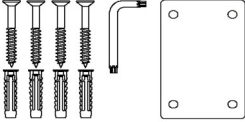
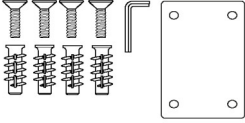
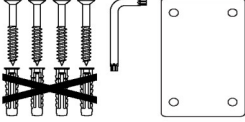
Product	PLUS uppfällbar sits, fast höjd
Varunummer	R5510112
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

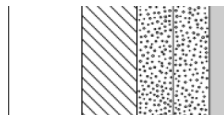
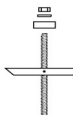
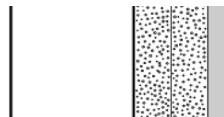
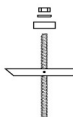
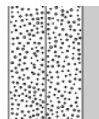
Product	PLUS uppfällbar sits, fast höjd
Varunummer	R5510112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS uppfällbar sits, fast höjd R5510112		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com