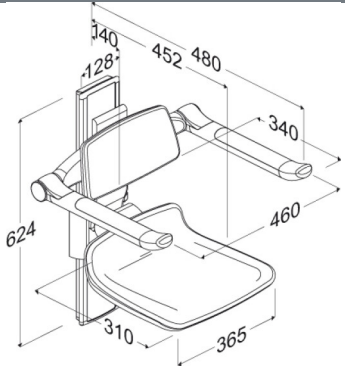




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart R7334035
<b>Farve</b>	NRF:6317091 EAN:5708590359366 HMI: 120479 FDA:INN/D135865  Rød (RAL 3003)
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS brusesæde 310, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 250 mm, uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højderegulérbar 250 mm  Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg.  <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
<b>Materialer</b>	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.

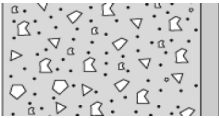
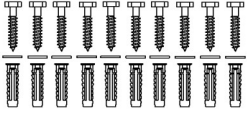

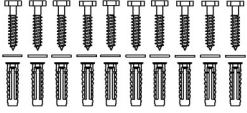
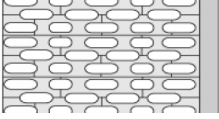
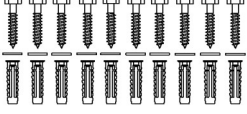
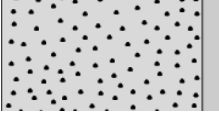
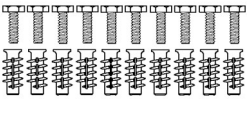
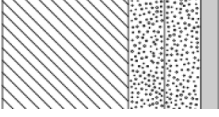
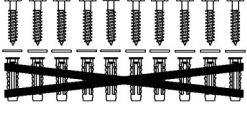


<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulerbart R7334035
<b>Ergonomi</b>	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 310 x 365 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
<b>Funktioner</b>	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

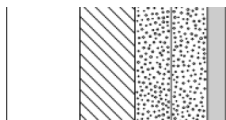
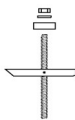

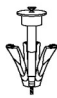
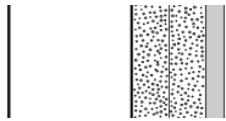
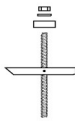

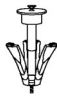
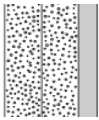


<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R7334035

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulerbart R7334035	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	