



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT wastafel muurframe,staand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie R4953000
<b>Kleur</b>	VVS:654005400 NRF:6132452 EAN:5708590349107 HMI: 105958 FDA:ILW/D142473 Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>SELECT support wastafel muurframe, staand. Elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel, incl. veiligheids stop functie. Aanbeveling: flexible aansluitset R2065. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (Aanbevolen bij MATRIX SMALL and MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafel). Excl. bevestigingset. zie technische handleiding (pdf) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wandtypes.</p> <p>SELECT wastafel muurframe, staand. Elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel, incl veiligheidsstopfunctie. Aanbeveling: flexibele aan-en afvoerset R2065. Incl bevestigingsbouten voor wastafel(Aanbevolen bij MATRIX SMALL en MATRIX Curve / New Curve wastafels. <b>Wij adviseren sifon R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</b> Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen (PS). Excl bevestigingsset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b>	In hoogte verstelbaar 300 mm



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT wastafel muurframe,staand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie R4953000
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 18 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> <b>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 171 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</b>
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 21 mm/s Speed down mm: 21 mm/s
<b>Noise level</b>	45 dB
<b>Materialen</b>	Geanodiseerd aluminium. De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS).De bovenplaat en compact laminaat. <i>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.</i>
<b>Ergonomy</b>	Het strakke en pure design plus het gladde oppervlak zijn eenvoudig schoon te maken en aantrekkelijk om te zien, en zorgen voor een goede hygiëne in de badkamer. De exclusieve aluminium zijprofielen zijn licht, duurzaam en elegant.
<b>Functie</b>	De wastafel wordt omhoog of omlaag versteld met behulp van de afstandbediening aan kabel of de hefboom control aan het uiteinde van de wastafel. De hendelbediening kan aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst en dient tevens als handdoekhouder. De hendelbediening is voldoende sterk om als extra ondersteuning te gebruiken. De wastafel is verstelbaar over 300 mm - van 670 tot 970 mm boven de vloer.
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

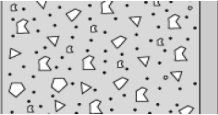
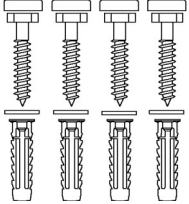

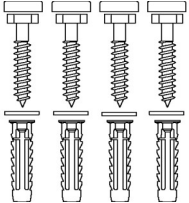
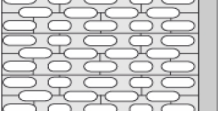
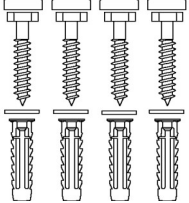
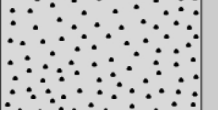
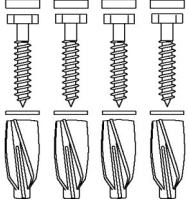
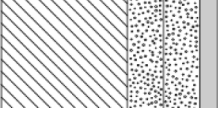
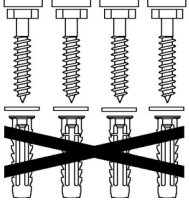


<b>Product</b>	SELECT wastafel muurframe,staand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie
<b>Artikelnummer</b>	R4953000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
<b>WEEE</b>	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

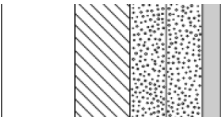
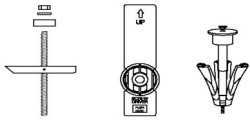
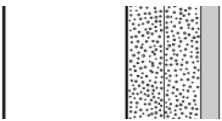
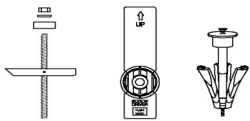
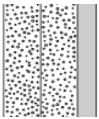


<b>Product</b>	SELECT wastafel muurframe, stand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie
<b>Artikelnummer</b>	R4953000

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT wastafel muurframe,stand met wandbevestiging, elektrisch in hoogte verstelbaar afstandbediening aan kabel, incl. veiligheid stop-functie R4953000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.