




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjddreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion R4952112
<b>Färg</b>	VVS: 654005312 NRF: 6132451 EAN: 5708590350271 HMI: 105956 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>SELECT upphängning till tvättställ, golvstående. Elektrisk höjddreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Exkl. monteringskruv för vägg.</p> <p>SELECT upphängning till tvättställ, golvstående. Elektrisk höjddreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS). Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjddreglerbar
<b>Höjjustering</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 18 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 171 kg belastar tvättstället.</b>

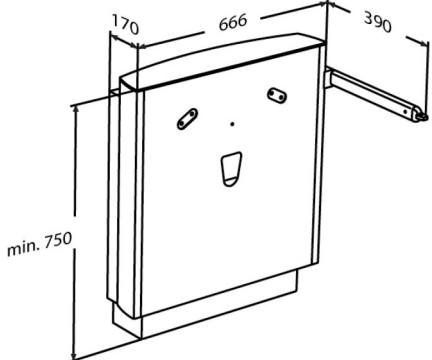

<b>Product</b>	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdregerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion
<b>Varunummer</b>	R4952112
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 21 mm/s Hastighet ner: 21 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	45 dB
<b>Material</b>	Anodiserad aluminium. Frontplattorna är i polystyren (PS). Topplattan i kompakt laminat. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1 och ISO 8191-2). Testrapport tillgänglig.</i>
<b>Ergonomi</b>	Upphängningens skarpa och rena design med sina glatta ytor är både lätt att rengöra och snygg att se på i vardagen. Samtidigt bidrar det till en god hygien i badrummet. De exklusiva aluminiumprofilerna är både slitstarka, lätta och snygga att se på.
<b>Funktioner</b>	Tvättstället höjs eller sänks med ett manövreringsgrepp på sidan av tvättstället. Manövreringsgreppet kan placeras på båda sidor av upphängning till tvättstället och fungerar samtidigt som handdukhängare. Manövreringsgreppet med den integrerade strömbrytaren för manövrering är stark nog att användas som extra stöd. Upphängning till tvättställ kan höjregleras 300 mm – från 670 till 970 mm över golvet.
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA31 Careline, (Linak), 1500N, IPX4
<b>Kontrollbox</b>	CB9 Careline, (Linak), IPX6
<b>Manöverdosa</b>	HB7, (Linak) IP66
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.




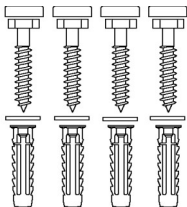

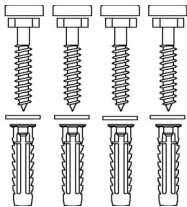
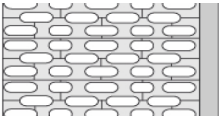
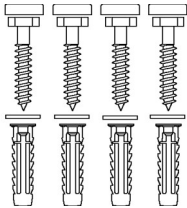
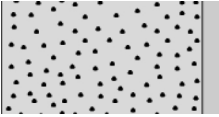
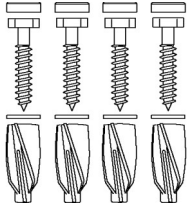
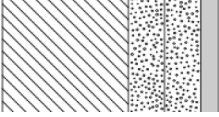
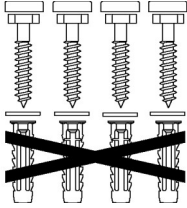
# PRESSALIT®

<b>Product</b>	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdregerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion
<b>Varunummer</b>	R4952112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	<p>Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.</p>



<b>Product</b>	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdregerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion
<b>Varunummer</b>	R4952112

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjddreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion R4952112
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.