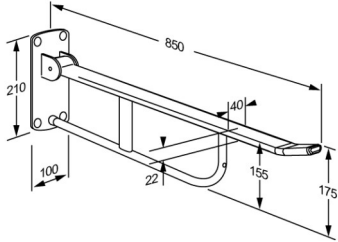




Produkt Varenummer	VALUE II toiletstøtte, fastmonteret R1109000
Farve	VVS:615891100 NRF:6191057 RSK:8487434 EAN:5708590367576 HMI: 123560 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>VALUE II toiletstøtte, fastmonteret, opklappelig, totallængde 850 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p> <p>VALUE II toiletstøtte, fastmonteret, opklappelig, totallængde 850 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium og plast. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal belastning: 120 kg. Når toiletstøtten belastes med 120 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 242 kg.
Materialer Ergonomi Funktioner	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig. Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb, samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug - eller for at give plads.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

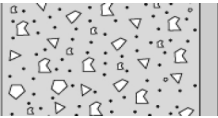
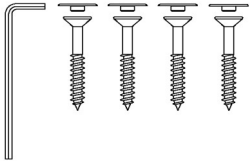

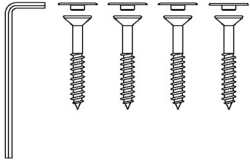
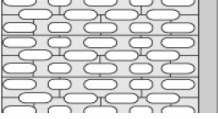
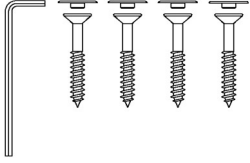
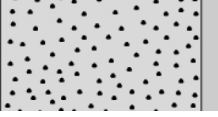
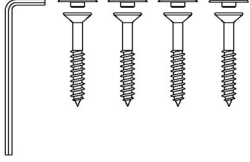
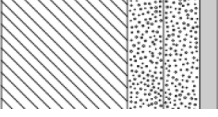
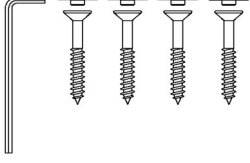


Produkt	VALUE II toiletstøtte, fastmonteret
Varenummer	R1109000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

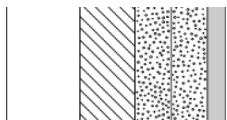
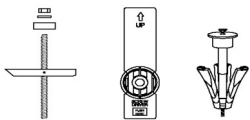
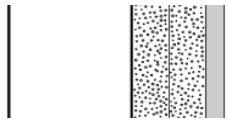
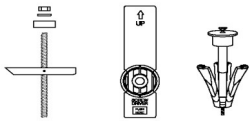
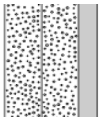



Produkt	VALUE II toiletstøtte, fastmonteret
Varenummer	R1109000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	VALUE II toiletstøtte, fastmonteret R1109000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Skruer til vægbefæstigelse medfølger. Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekte plugs anvendes. Se venligst monteringsvejledningen.