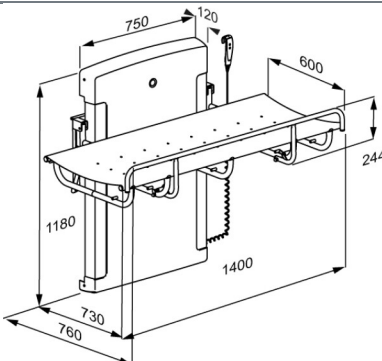




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SCT 1000 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart R8583114000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 777543640 EAN: 5708590377636 HMI: 140128</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>SCT 1000 duschbrits, eldriven, höjdjusterbar 400 mm; från 480 mm - 880 mm, med manöverdosa. Uppfällbar. Inkl. sänggrind. Utvändiga mått: 760 mm x 1 400 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdreglerbar
<b>Höjdjustering</b>	400 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal användarvikt (MUM): 200 kg. Maximal belastning (SWL): 200 kg. Vid 200 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 27 kg. <i>Britsen har testats statistiskt med 500 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 11 mm/s Hastighet ner: 9 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	50 dB



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SCT 1000 duschbrits, elektrisk höjddreglerbart R8583114000
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	<p>Pulverlackerat rostfritt stål och PVC-överdragen kanvas (ftalatfri).</p> <p>Vårdgivaren kan enkelt ställa in britsens höjd för att få en optimal arbetsposition. Britsen tillåter brukaren att duscha och klä sig på ett säkert sätt samtidigt som risken för arbetsskador minskar. Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används.</p> <p>El-duschbritsen med manöverdosa levereras med manöverdosa. De röda tryckknapparna indikerar tydligt "upp" och "ner". Manöverdosan levereras med väggbeslag. Den integrerade gascylindern gör det lätt att fälla upp liggplatsen så att den bara upptar minimalt med plats när den inte används. Sänggrinden är enkel att fälla upp/ner. Der finns ett duschdraperi till duschbritsen som skyddar vårdgivaren mot vattenstänk.</p>
<b>Anslutnings ström (V)</b> <b>Motor</b> <b>Kontrollbox</b> <b>Manöverdosa</b> <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	<p>230</p> <p>LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6</p> <p>CA63 Careline (Linak), IPX6</p> <p>HB30 (Linak), IP66</p> <p>Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W</p>
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.

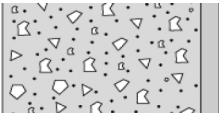
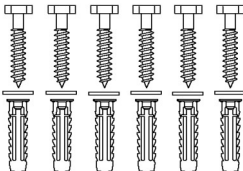

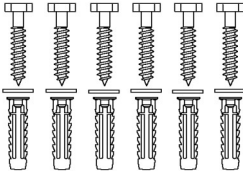
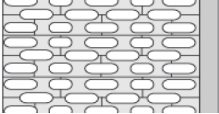
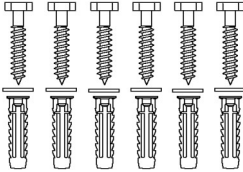
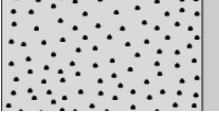
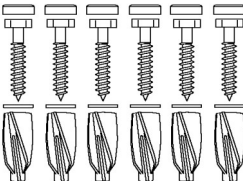
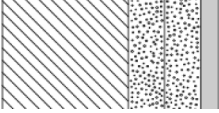
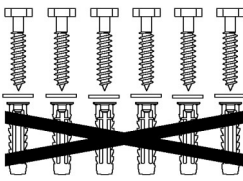


<b>Product</b>	SCT 1000 duschbrits, elektrisk höjdregerbart
<b>Varunummer</b>	R8583114000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

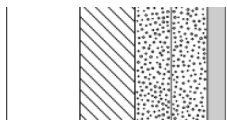
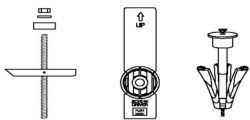
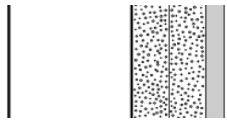
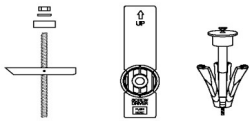
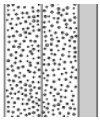



<b>Product</b>	SCT 1000 duschbrits, elektrisk höjdregerbart
<b>Varunummer</b>	R8583114000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SCT 1000 duschbrits, elektrisk höjddreglerbart R8583114000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.