



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450, elektrisch in hoogte verstelbaar R7634277
Kleur	NRF:6317149 EAN:5708590360195 HMI: 124323 Lime groen 
Beschrijving	Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar. Beschikbaar met en zonder opening in de het zitgedeelte en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS douchezitting 450, met rug- en armleuningen. Elektrisch in hoogte verstelbaar over 500 mm, de armleuningen zijn onafhankelijk verstelbaar. De zitting en de armleuningen zijn opklapbaar. Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel. het anti-slip grijp oppervlak van de armleuningen is gemaakt van zachte SEBS. Inclusief een bevestigingsset voor een stenen muur.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	500 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg. Maximale belasting voor armleuningen is 55 kg. Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 81 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 2,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 10 mm/s Speed down mm: 10 mm/s
Noise level	48 dB



Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450, elektrisch in hoogte verstelbaar R7634277
Materialen	De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een voorgevormd oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is beschermd met een heldere PU laklaag. De armleuningen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De scharnier arm is ook gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS.
Ergonomy	Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De ovale vorm van de armleuningen geeft een comfortabel oppervlakte om op te leunen en tegen aan te duwen.
Funktie	Elektrisch verhogen of verlagen met behulp van handbediening kan de douchezitting eenvoudig naar boven of beneden worden aangepast tot een juiste werkhoogte voor de verzorger, terwijl de gebruiker erop zit. De zitting, rugleuning en armleuningen kunnen gelijktijdig worden aangepast dankzij een veilig en eenvoudig kliksysteem. De armleuningen kunnen ook onafhankelijk van de zitting en rugleuning worden aangepast. De zitting en armleuningen kunnen opgeklapt worden wanneer de zitting niet in gebruik is of om het vloeroppervlakte te maximaliseren. De handbediening wordt geleverd met houder voor montage aan de muur.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 60 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



Product	PLUS douchezitting 450, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R7634277
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd. Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



PRESSALIT®

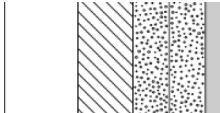
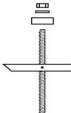
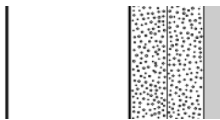
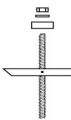
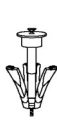
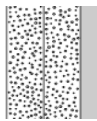
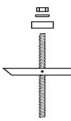
Product	PLUS douchezitting 450, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R7634277

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450, elektrisch in hoogte verstelbaar R7634277			
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			

pressalit.com

PRESSALIT®