




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Haltegriff/Brausestange 1000 x 1090 mm RT144112
Farbe	VVS:777569702 NRF:6311236 RSK:8180965 EAN:5708590318806 HMI: 42068 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegrifflösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern. PLUS Brausestange, Durchmesser 33 mm, A: 1000 mm x B: 1090 mm, zur Festmontage. Kann mit RT600 Brausekopfhalterung kombiniert werden. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen. Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen.
Produktkapazität	Maximale Belastung: 235 kg. Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet. <i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i>
Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminium Abdeckkappen aus Cycloy Kunststoff
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.



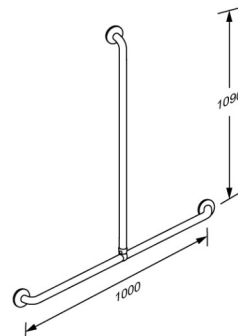

PRESSALIT®





Produkt	PLUS Haltegriff/Brausestange 1000 x 1090 mm
Produktnummer	RT144112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.








PRESSALIT®

Produkt	PLUS Haltegriff/Brausestange 1000 x 1090 mm
Produktnummer	RT144112

Montage in verschiedenen Wandtypen

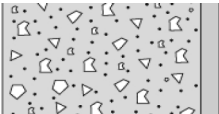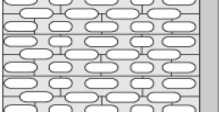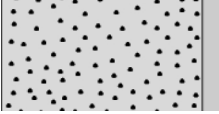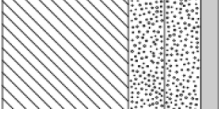	Beton >B25 V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8667 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	

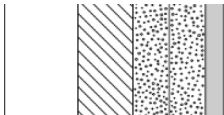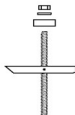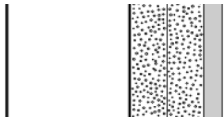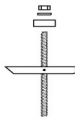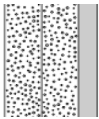

Produkt Produktnummer	PLUS Haltegriff/Brausestange 1000 x 1090 mm RT144112		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (12 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (12 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		