



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Wandschiene, 900 mm R9809112	
Farbe	VVS:615841109 NRF:7501014 RSK:8565090 EAN:5708590305752 HMI: 71740 Anthrazitgrau	
Produkt- beschreibung	PLUS Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten. PLUS Wandschiene, 900 mm, zur waagerechten Montage. Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.	
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg	
Materialien Ergonomie Funktionen	Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen. Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden. Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.	
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.	



PRESSALIT®

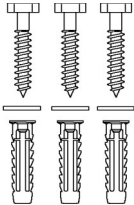
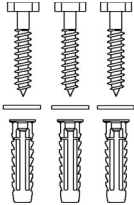
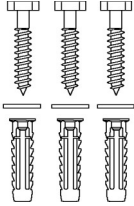
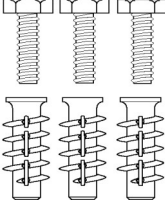
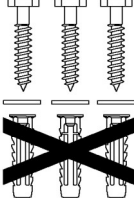
Produkt	PLUS Wandschiene, 900 mm
Produktnummer	R9809112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Wandschiene, 900 mm
Produktnummer	R9809112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8670 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8620 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Wandschiene, 900 mm
Produktnummer	R9809112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

30. juli 2026