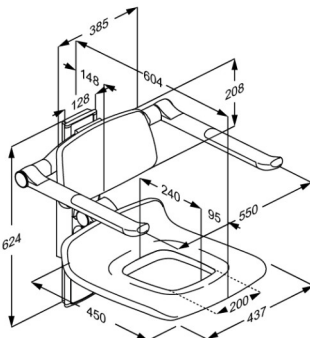




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulerbart R7435000
<b>Farve</b>	VVS: 777516000 NRF: 6317127 EAN: 5708590359823 HMI: 124338 FDA: INN/D135865 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS brusesæde 450 med hul, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulerbart 195 mm, uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige.</p> <p>Ekskl. monteringskrue til væg. <i>Erstatter R7431</i></p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højderegulerbar 195 mm Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 21 kg. <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p>
<b>Materialer</b>	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.

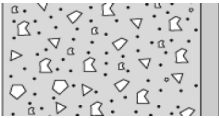
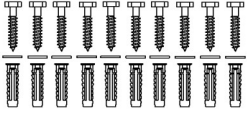

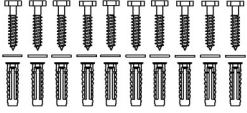
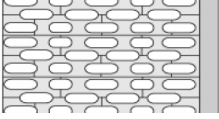
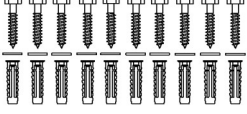
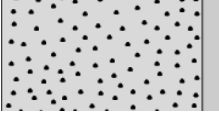
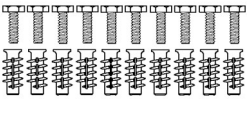
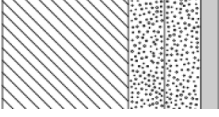
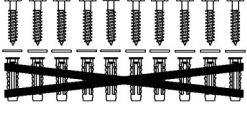


<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulerbart R7435000
<b>Ergonomi</b>	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
<b>Funktioner</b>	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

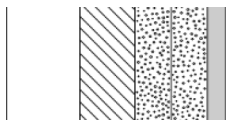
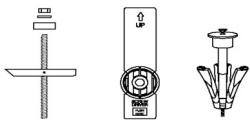
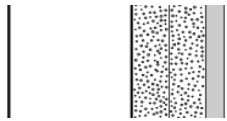
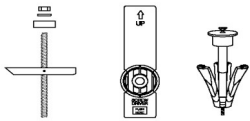
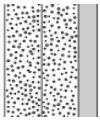


<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R7435000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart R7435000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	