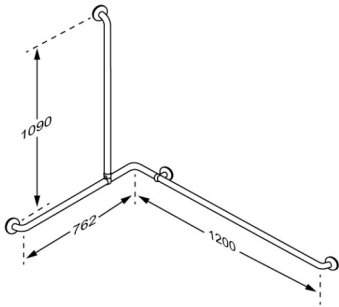




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS håndgrebshjørne med lodret greb 762 x 1200 x 1090 mm RT138035
<b>Farve</b>	VVS:777568735 NRF:6317189 EAN:5708590146508 HMI: 25429 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Rød (RAL 3003) 
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til øget selvhjulpethed.</p> <p>PLUS håndgrebskombination, diameter 33 mm, A: 762 mm x B: 1200 mm x C: 1090 mm, til fastmontering. Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i grebet. Inkl vægroset, som skjuler monteringskruerne. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: 235 kg. Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 56 kg. <i>Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 17966:2016.</i>
<b>Materialer</b> <b>Ergonomi</b>	<p>Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycloy-plast Strop: Nylon (PA)</p> <p>Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.</p> <p>Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.</p>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

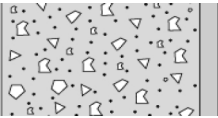



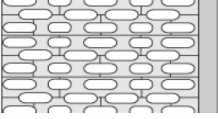

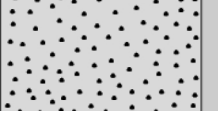
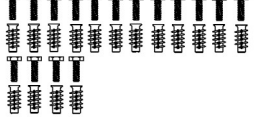
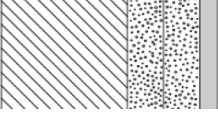



<b>Produkt</b>	PLUS håndgrebshjørne med lodret greb 762 x 1200 x 1090 mm
<b>Varenummer</b>	RT138035
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

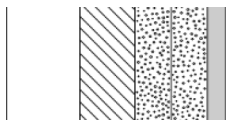
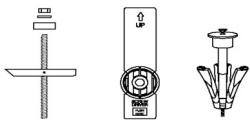
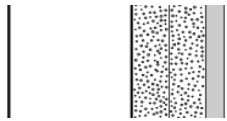
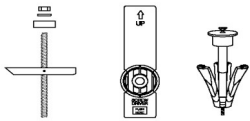
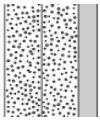


<b>Produkt</b>	PLUS håndgrebshjørne med lodret greb 762 x 1200 x 1090 mm
<b>Varenummer</b>	RT138035

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8668 - Monteringssæt, 16 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS håndgrebshjørne med lodret greb 762 x 1200 x 1090 mm RT138035	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (16 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (16 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	