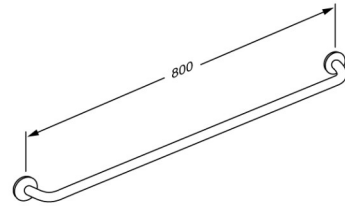




Produkt	PLUS håndgreb 800 mm
Varenummer	RT103000
	VVS:777565400 NRF:6191672 RSK:8980548 EAN:5708590145921 HMI: 19084 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til øget selvhjulpethed.</p> <p>PLUS håndgreb, diameter 33 mm, længde 800 mm, til fastmontering. Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i grebet. Inkl vægroset, som skjuler monteringsskrueerne. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringsskrue til væg.</p>
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 235 kg. Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 56 kg. <i>Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 17966:2016.</i>
Materialer	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycloy-plast
Ergonomi	Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt. Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



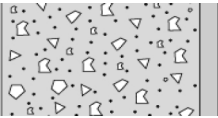
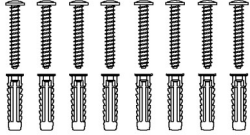

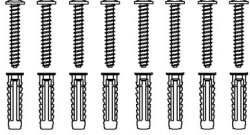
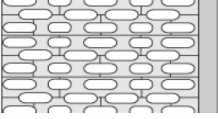
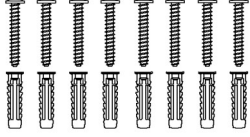
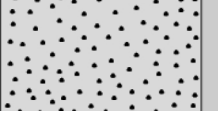
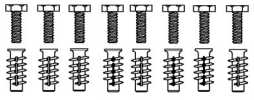
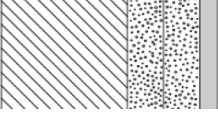
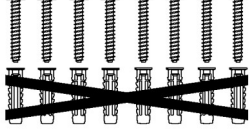


Produkt	PLUS håndgreb 800 mm
Varenummer	RT103000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

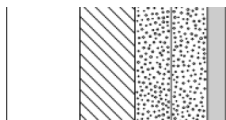
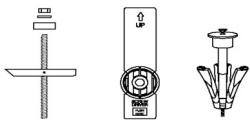
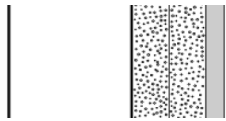
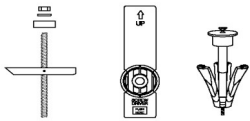
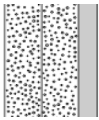


Produkt	PLUS håndgreb 800 mm
Varenummer	RT103000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8666 - Monteringssæt, 8 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	PLUS håndgreb 800 mm RT103000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	