




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar R4580112
Kleur	VVS: 654001510 NRF: 6132529 RSK: 7972588 EAN: 5708590309415 HMI: 71758 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracietgrijs
Beschrijving	 PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS wastafel muurframe. Handmatig 240 mm in hoogte verstelbaar met bedieningshendel. In hoogte en zijwaarts instelbaar. Aanbeveling: flexibel aan en afvoer systeem R2064/R2065/R2067. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Antraciet Afdekplaat voor verticale wandrails. Materialen: aluminium en ABS polymeer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. Voor montage op horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 240 mm

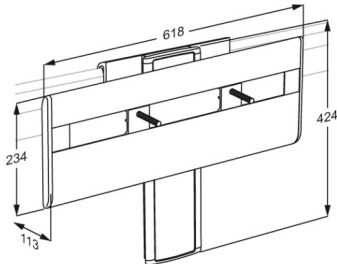

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar R4580112
Product capaciteit	Maximale belasting: 135 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 135 kg, zal elke wandbevestiging met 30 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 135 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 151 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Materialen Ergonomy Funktie	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het wastafel muurframe is geschikt voor alle soorten met bevestigingsbouten te monteren wastafels. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken. Als de hoogte van de wastafel slechts incidenteel moet worden aangepast, kan een handmatig bediend wastafel muurframe de beste oplossing zijn. Aanpassing omvat het ondersteunen van het gewicht van de wastafel en een deel van het frame. Wanneer frequente hoogteverstelling wordt verwacht, gebruikt u in plaats daarvan het wastafel muurframe met gasdrukcilinder R4680 of elektrisch bediende wastafel muurframe R478x.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R4580112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R4580112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026