




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar R4550112
<b>Färg</b>	VVS: 654001110 NRF: 6132527 RSK: 7972586 EAN: 5708590309385 HMI: 71763 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS upphängning till tvättställ, manuell höjdregerbart 240 mm, antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2067/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Exkl. monteringskruvar för vägg.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjdregerbar 240 mm Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 57 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 151 kg belastar tvättstället.</i>

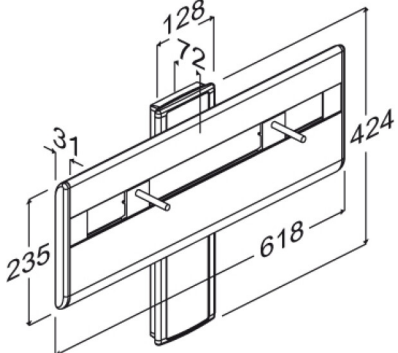


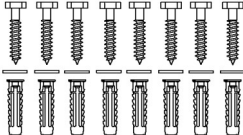

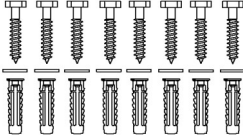
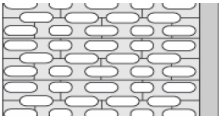
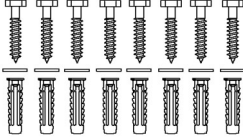
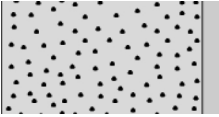
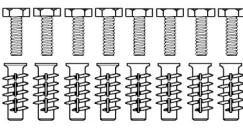
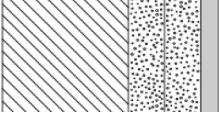
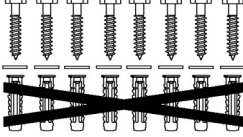
# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar
<b>Varunummer</b>	R4550112
<b>Funktioner</b>	Viktigt ! Ej avsedd för daglig höjjustering. Vid daglig höjjustering rekommenderas gasdriven upphängning R4650 eller eldriven upphängning R475x.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspirit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbelägningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklARATION</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.








<b>Product</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar
<b>Varunummer</b>	R4550112

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

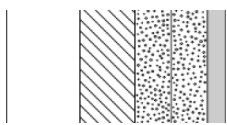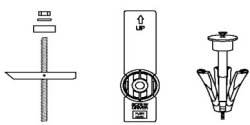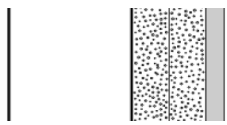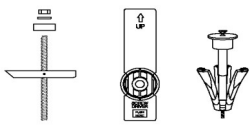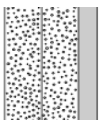

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar R4550112
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 