




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar R7134112
<b>Färg</b>	VVS:777514812 NRF:6317079 EAN:5708590359199 FDA:INN/D135865  Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg- och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjreglerbart 195 mm, utan användning av verktyg. Uppfällbara armstöd kan höjregleras oberoende av sits och ryggstöd.</p> <p>Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej).</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjreglerbar 195 mm  Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 24 kg.  <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.  Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm.. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.

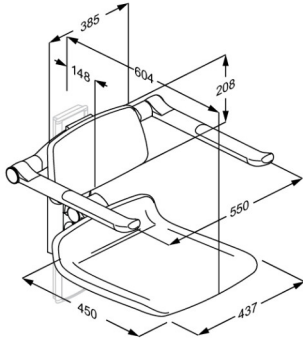

# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar R7134112
<b>Funktioner</b>	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjregleras oberoende av sits och ryggstöd.
<b>Garanti</b>  <b>Rengöring</b>	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjdglerbar
<b>Varunummer</b>	R7134112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®