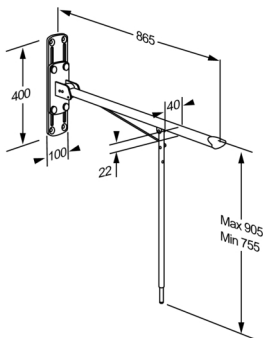




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, højderegulerbar R1111000
Farve	VVS:615722410 NRF:6191644 RSK:7972413 EAN:5708590176437 HMI: 25414 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 Toiletstøtte med ben, 150 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat. Toiletstøtte med ben, 150 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulerbar 150 mm Maksimal belastning: 135 kg. Når toiletstøtten belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 29 kg.
Materialer Ergonomi Funktioner	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepropperne er fremstillet af nylon (PA). En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig. Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb, samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug - eller for at give plads. Med ben for ekstra understøtning. Højdejusterbar 145 mm.



PRESSALIT®

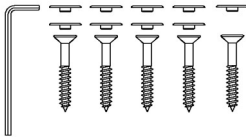
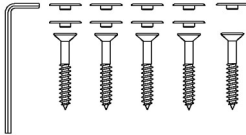
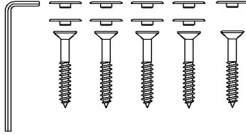
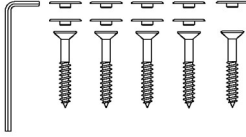
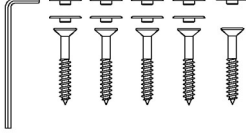
Produkt	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar
Varenummer	R1111000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortynnes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

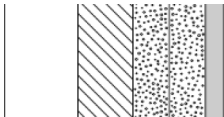
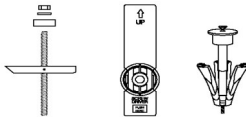
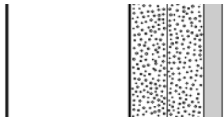
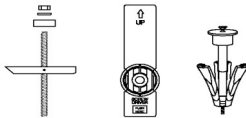
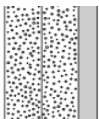
Produkt	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar
Varenummer	R1111000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar R1111000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (5 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (5 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com