




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE IV ryggstödd, fast höjd R1661000112
Färg	VVS: 777525090 NRF: 6311837 RSK: 8565071 EAN: 5708590355115 HMI: 124224 DB: 2084079 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
Beskrivning	 <p>VALUE IV duschsits och ryggstöd är den enkla lösningen för användare som behöver kunna sitta ner medan de tar en dusch.</p> <p>VALUE IV ryggstödd. Fast höjd. Material: Pressgjuten aluminium och vakuumformad polyeten (PE). Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p>
Justerbar	Fast höjd
Material	Väggbeslag är tillverkat i pressgjuten aluminium, ryggstöd är tillverkat av vakuumformad polyeten (PE).
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

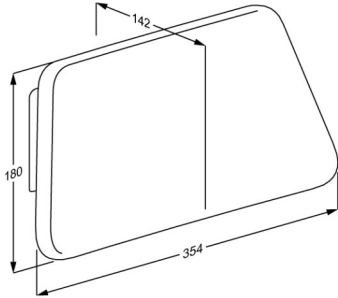

Product	VALUE IV ryggstöd, fast höjd
Varunummer	R1661000112
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>