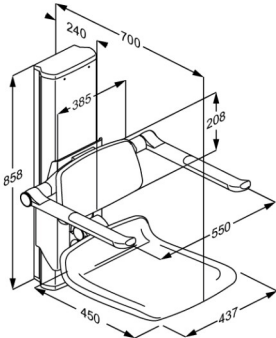




# PRESSALIT®

|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                | PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar<br>R7634277   |
| <b>Färg</b>  | NRF:6317149<br>EAN:5708590360195<br>HMI: 124323<br><br>Limegrön   |
| <b>Beskrivning</b>   |  <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdglerbart 500 mm, eldriven med manöverdosa. Uppfällbara armstöd kan höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd.</p> <p>Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Exkl. monteringskruv för vägg.<br/><i>Ersätter R7470</i></p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjjustering</b><br><b>Produktkapacitet</b> | Höjdglerbar<br>500 mm<br><br>Max brukarvikt (sits): 150 kg<br>Max belastning armstödd: 55 kg<br>När duschsitsan belastas med 150 kg, belastas varje fästskruv med 61 kg.  |
| <b>Uppåtgående hastighet</b><br><b>Ljudnivå</b>                    | <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 2,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i><br><br>Hastighet upp: 10 mm/s<br>Hastighet ner: 10 mm/s<br><br>48 dB  |
| <b>Material</b>  | Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar<br>R7634277   |
| <b>Ergonomi</b><br><br><b>Funktioner</b> | Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm..<br>Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort.<br>Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.<br><br>Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd. Med elektrisk manövrering är det möjligt för vårdgiveren att ställa in sitsen till en bra arbetshöjd medan brukaren sitter på sitsen. |
| <b>Anslutnings ström (V)</b>             | 230   |
| <b>Motor</b>                             | LA40 (Linak) 6000N, IPX6  |
| <b>Kontrollbox</b>                       | SMPS14 (Linak) IPX6   |
| <b>Manöverdosa</b>                       | HB3 (Linak) IP66  |
| <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b> | Strömförbrukning vid maximal belastning: 60 W<br>Strömförbrukning vid standby: 0,5 W  |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.   |



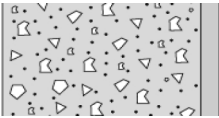
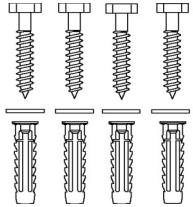

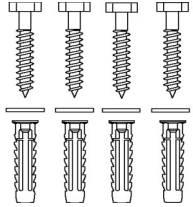
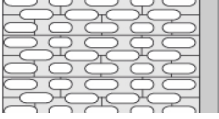
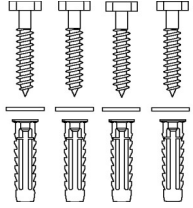
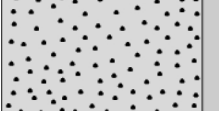
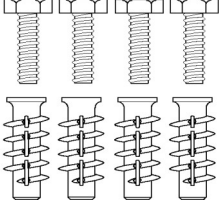
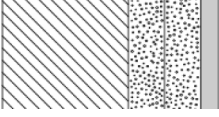
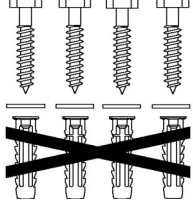
# PRESSALIT®

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar<br>R7634277  |
| <b>Rengöring</b>                    | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Erisan OXY+<br/>Tvättspirit 70%<br/>CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>WEEE</b>                         | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.  |

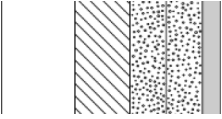
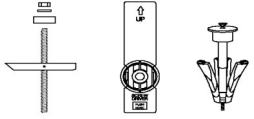
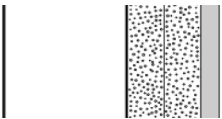
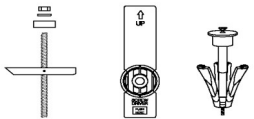
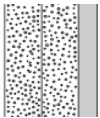
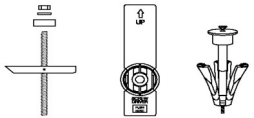


|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Product</b>    | PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar |
| <b>Varunummer</b> | R7634277                                  |

## Montage i olika väggtyper

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8653 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8.<br>Måste beställas separat.  |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>   | PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar<br>R7634277  |   |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b><br>Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. |    |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.        |    |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.                    |  |