




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement R9632721000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	<p>VVS: 777542320 EAN: 5708590389943 HMI: 139822</p>  <p>Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur.</p> <p>MCT 3 table d'habillage mobile, 700 x 2100 mm, deux côtés rabattables. Réglable en hauteur électriquement par télécommande filaire. Réglable 500 mm de 450 à 950 mm. Matelas à commander séparément.</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Hauteur de réglage</b>	500 mm
<b>Capacité du produit</b>	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 200 kg. Charge maximale (SWL) : 205 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 512,5 kg, car la norme IEC 60601-1 exige des tests avec un facteur de sécurité de 2,5.</i>
<b>Vitesse en montant</b>	Vitesse en montant: 17 mm/s Vitesse en descendant: 17 mm/s
<b>Niveau sonore</b>	50 dB
<b>Matériaux</b>	Plastique, stratifié compact et acier laqué.

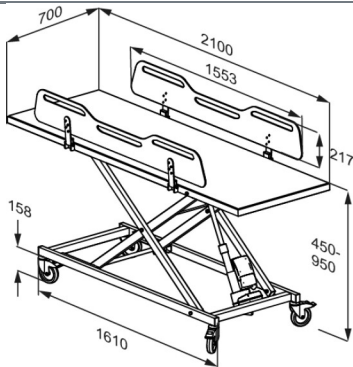

<b>Article</b>	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement
<b>Numéro article</b>	R9632721000
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La barrière de sécurité ergonomique a une partie centrale rabaissée très pratique, qui offre un meilleur accès et un meilleur environnement de travail pour le soignant, pendant les transferts, le change ou l'habillage de l'utilisateur.</li><li>• Les barrières de sécurité manipulables d'une seule main permettent au soignant de maintenir un contact visuel et physique avec l'utilisateur pendant tout le processus des soins. Les rails de sécurité rabattables permettent également un accès facile des quatre côtés de la table.</li><li>• Les poignées découpées dans les barrières de sécurité permettent à l'utilisateur de participer quand il doit être retourné, cela motive également l'entraînement physique.</li><li>• Les surfaces de contacts sont lisses et faciles à nettoyer car elles n'accumulent ni la saleté ni les bactéries.</li></ul>
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le chariot peut être déplacé d'une pièce à l'autre pour faciliter le transport et pour plusieurs utilisateurs.</li><li>• Barrières rabattables et relevables intuitivement d'une seule main.</li></ul>
<b>Raccordement électrique (V)</b>	230
<b>Vérin</b>	LA40 (Linak) IPX6
<b>Boîte de contrôle</b>	CA30 (Linak) IPX6
<b>Télécommande filaire</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Consommation d'électricité</b>	Consommation d'électricité en charge maximale: 280 W Consommation d'électricité en veille: 0,5 W
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.



<b>Article</b>	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement
<b>Numéro article</b>	R9632721000
<b>Nettoyage</b>	<p>Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon humide trempé dans un mélange légèrement savonneux, tel qu'une solution de nettoyage universelle. Après le nettoyage, il est indispensable d'essuyer le produit à l'aide d'un chiffon doux sec. Cette étape est cruciale pour éviter que les matériaux ne se décolorent. Cela permet également d'éviter toute dégradation potentielle de la peinture de surface.</p> <p>Les nettoyeurs suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
<b>WEEE</b>	Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.
<b>Déclaration de conformité</b>	<p>Ce produit répond aux exigences propres à :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux</li><li>- la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes</li><li>- la directive 2011/65/UE sur RoHS.</li></ul>



PRESSALIT®

---

<b>Article</b>	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement
<b>Numéro article</b>	R9632721000

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®