




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar R7665112
Farbe	Anthrazitgrau
Produktbeschreibung	VVS: 777517512 NRF: 6317159 EAN: 5708590360362 HMI: 124230  PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe, elektrisch höhen- verstellbar als auch manuell verstellbar, mit und ohne Pflegeöffnung sowie wahlweise mit Rücken- und Armlehnen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen. PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, Elektromotor, Rückenlehne und Armlehnen. Um 500 mm elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar, die Armlehne sind unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar. Hochklappbare Sitz und Armlehnen. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Die Armlehne aus weichem SEBS-Kunststoff sind griffig und rutschfest. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar 500 mm Maximales Anwendergewicht (Sitz): 150 kg. Maximale Belastung der Armlehnen: 55 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 150 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 35 kg.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 10 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 10 mm/s

PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 2,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.

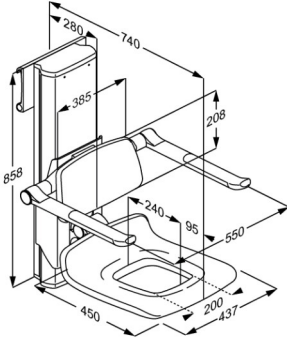

Produkt	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7665112
Geräusch	48 dB
Materialien	Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rückenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Die Armlehnen bestehen vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und sind an den Enden mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne und Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.
Ergonomie	Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort. Die ovale Form der Armlehne stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt.
Funktionen	Der Duschsitz und die Armlehnen sind hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheren Klicksystems lässt sich Sitzfläche, Rücken und Armlehne gleichzeitig einstellen. Die Armlehne sind darüber hinaus unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar. Der Duschsitz lässt sich einfach verschieben.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Steuerkasten	SMPS14 (Linak) IPX6
Kabelgebundener Fernbedienung	HB3 (Linak) IP66
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 60 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7665112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitz und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, elektrisch höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7665112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026