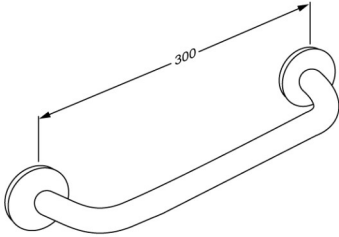




|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS stödhandtag 300 mm<br>RT100035   |
| <b>Färg</b>                         | VVS:777565135<br>NRF:6317161<br>EAN:5708590145822<br>HMI: 19081<br>NBS:N13:436<br>FDA:ILS/D135866<br>Röd (RAL 3003)<br>  |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand.</p> <p>PLUS stödhandtag, diameter 33 mm, längd 300 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget.<br/>Inkl. väggrosett, som gömmer monteringskruvarna.<br/>Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial.<br/>Exkl. monteringskruv för vägg.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Max belastning: 235 kg.<br>När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg.<br><i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>   |
| <b>Material</b><br><b>Ergonomi</b>  | Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycoloy-plast.<br><br>Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp.<br><br>Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.   |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.   |



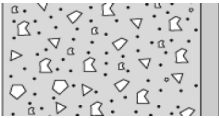
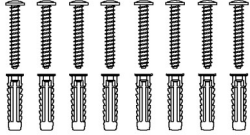

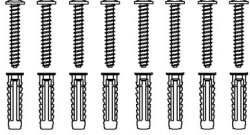
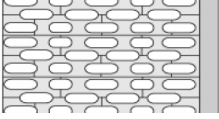
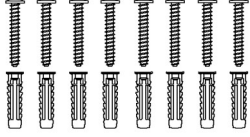
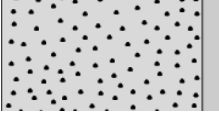
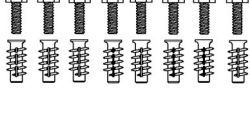
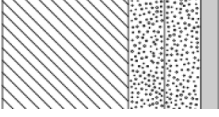
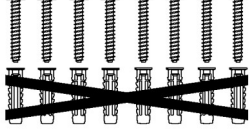
PRESSALIT®

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Product</b>    | PLUS stödhandtag 300 mm   |
| <b>Varunummer</b> | RT100035  |
| <b>Rengöring</b>  | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |

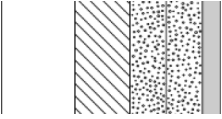
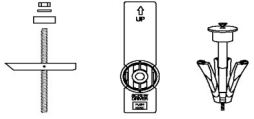
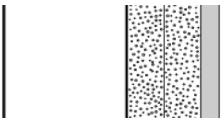
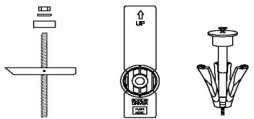
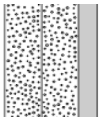



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS stödhandtag 300 mm |
| <b>Varunummer</b> | RT100035                |

## Montage i olika väggtyper

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.                                       |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.                                   |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8666 - Monteringsset 8 st. M5 x 50, plugg FTP K 6.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>   | PLUS stödhandtag 300 mm<br>RT100035   |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b><br>Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br> |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br>        |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.<br>        |