




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, Festmontage R5510000
Farbe	VVS:777531000 NRF:7501001 RSK:7973939 EAN:5708590306339 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Weiß
Produkt- beschreibung	 Der Klappsitz ist perfekt, wenn ein Bedarf an einem zusätzlichen Sitzplatz besteht und nur minimaler Platz vorhanden ist. Das kann in Räumen vorkommen, in denen oft ein Bedarf zum Ausruhen besteht - z.B. in der Küche, im Aufzug, im Korridor oder zum An- und Ausziehen im Badezimmer. Klappsitze sind für Verwendung in der Dusche nicht geeignet. Siehe Duschsitze stattdessen. PLUS Klappsitz. Zur Festmontage. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximales Anwendergewicht: 435 kg. Bei einer Belastung der Klappsitz mit 435 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 199 kg belastet. Bitte beachten Sie, dass bei einem Benutzergewicht von 435 kg für eine sichere Installation möglicherweise eine verstärkte Wand erforderlich ist. Ein Benutzergewicht von bis zu 262 kg kann – abhängig von der Wandart – an einer Standardwand installiert werden, sofern unsere Installationsanweisungen befolgt werden. Bei einer Belastung des Sitzes mit 262 kg wird jede Wandbefestigung mit 120 kg belastet. <i>PLUS Klappsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien	Der Klappsitz besteht aus duroplastischem Kunststoff, die Befestigungs- und Aufhängungshalterung aus 10 my eloxiertem Aluminium. Die Endkappen bestehen aus ABS-Kunststoff.

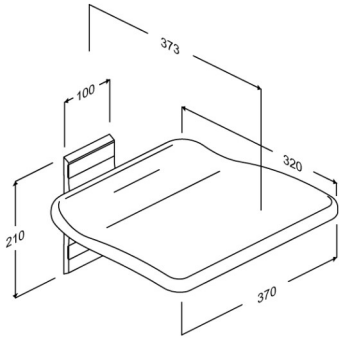

PRESSALIT®

Produkt	PLUS Klappsitz, Festmontage
Produktnummer	R5510000
Ergonomie	Ergonomisch geformter Sitz, der guten und bequemen Halt bietet.
Funktionen	Der Sitz lässt sich bei Nichtgebrauch zusammenklappen – oder um Platz zu schaffen. Im zusammengeklappten Zustand steht er von selbst.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausbessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Klappsitz, Festmontage
Produktnummer	R5510000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. 
	Vollziegel >= Mz12 V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. 
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. 
	Porenbeton P4 V8654 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. 



Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, Festmontage R5510000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		