




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart R4580112
Farve	VVS: 654001510 NRF: 6132529 RSK: 7972588 EAN: 5708590309415 HMI: 71758 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS vaskophæng. Manuelt højderegulérbart 240 mm ved hjælp af betjeningsgreb. Højde- og sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium og kunststof. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Til montering på vandret vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højde- og sideværts regulérbar 240 mm Maksimal belastning: 135 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 30 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 135 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 151 kg støtter sig til vasken.
Materialer	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS.

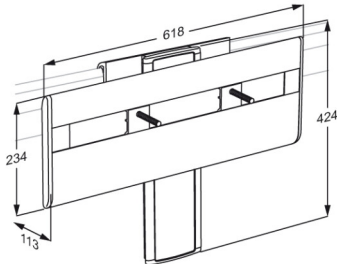

PRESSALIT®

Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R4580112
Ergonomi	Vaskophængen passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
Funktioner	Når håndvaskens højde kun lejlighedsvis skal ændres, kan et manuelt regulérbart vaskophæng være en god løsning. Vigtigt: Ikke egnet til daglig højderegulering. Ved anvendelse der kræver daglig højderegulering anbefales gasdrevet vaskophæng R4680 eller et eldrevet vaskophæng R478x.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R4580112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R4580112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®