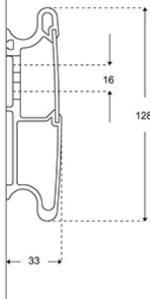




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS glissière-support, 1800 mm R9818112	
Couleur	VVS:615841118 NRF:7501017 EAN:5708590305813 HMI: 71743 Gris anthracite	
Description	PLUS glissière-support sert de suspension de barres de relèvement, sièges de douche et supports de lavabo, et rend possible le réglage latérale de ces produits. Veuillez trouver ci-dessous une sélection des produits qui peuvent être montés sur la glissière-support. PLUS glissière-support, 1800 mm, pour montage horizontal. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Matériaux : aluminium et polystyrène. Livré sans vis de montage.	
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Charge maximale admissible : supporte - en fonction de l'état du mur - une charge maximale de 1000 kg maximum	
Matériaux Ergonomie Fonctions	La glissière-support est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, la plaque frontale est faite de polystyrène. Les extrémités sont recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les glissières-support horizontales donnent de la flexibilité à l'aménagement. Les produits peuvent être décalés latéralement sur la glissière afin que leur positionnement respecte les impératifs d'espace, de soins et de manipulation. Le poids de chaque produit de salle de bains est réparti sur toute la longueur de la glissière. Les produits peuvent être fixés sur la glissière avec fonctions de réglage et de verrouillage intuitives. La plaque frontale recouvre et protège les vis de montage et d'éventuels câbles.	
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.	



PRESSALIT®

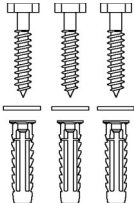
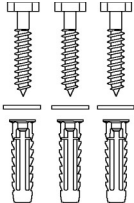
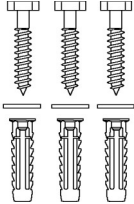
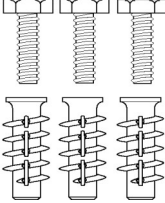
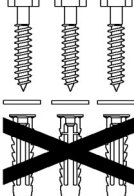
Article	PLUS glissière-support, 1800 mm
Numéro article	R9818112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sufanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®

Article	PLUS glissière-support, 1800 mm
Numéro article	R9818112

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8620 - Kit vis de montage, 3 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8620 - Kit vis de montage, 3 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8620 - Kit vis de montage, 3 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8670 - Kit vis de montage, 3 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8620 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



PRESSALIT®

Article	PLUS glissière-support, 1800 mm
Numéro article	R9818112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®