




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, bediening links, in hoogte verstelbaar R4852000
Kleur	VVS: 654022200 RSK: 7508071 EAN: 5708590340920 HMI: 138112 FDA: ILW/D142473 Wit
Beschrijving	 MATRIX muurframes zijn op maat gemaakt voor MATRIX wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbare versies, evenals in vaste versies, allemaal met een hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen. MATRIX wastafel muurframe voor links afgeronde wastafel, wandmontage met witte afdekplaat en incl flexibele aan-en afvoerset. Elektrisch 200 mm in hoogte verstelbaar met bedieningstoetsen aan voorzijde van de wastafel Incl bevestigingsbouten voor wastafel. (kan alleen worden gebruikt met MATRIX Angel Deep wastafels, R2152/R2153). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materiaal: Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 200 mm

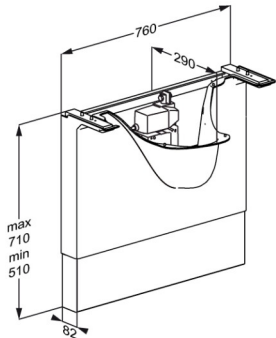

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, bediening links, in hoogte verstelbaar R4852000
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 160 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 30 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 60 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> <i>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 30 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 160 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 11,75 mm/s Speed down mm: 11,75 mm/s
Noise level	48 dB
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
Control box	CB9 Careline (Linak), IPX6
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 70 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



Product	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, bediening links, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4852000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



PRESSALIT®

Product	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, bediening links, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4852000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, bediening links, in hoogte verstelbaar R4852000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com