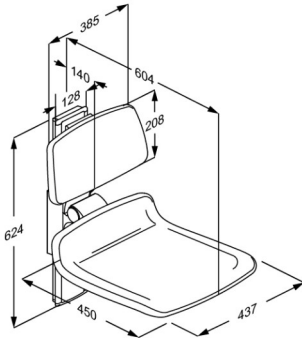




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjdglerbar R7424112
<b>Färg</b>	VVS: 777515412 NRF: 6317117 EAN: 5708590359687 HMI: 124341 DB: 2510924 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppfällbart, med ryggstöd. Höjdglerbart 380 mm, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Exkl. monteringskrav för vägg. <i>Ersätter R7420</i></p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjdglerbar 380 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 24 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.



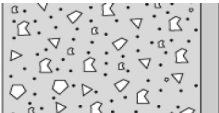
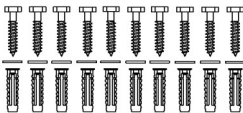

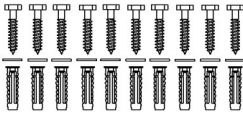
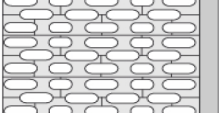
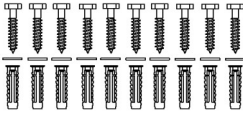
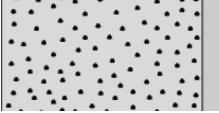
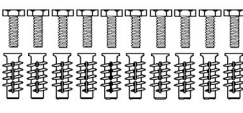
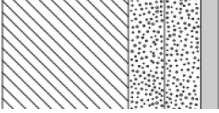
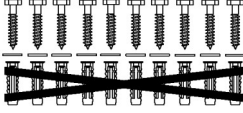
# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar R7424112
<b>Garanti</b>  <b>Rengöring</b>	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

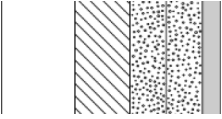
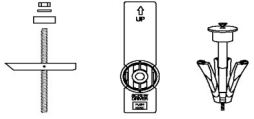
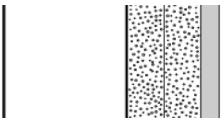
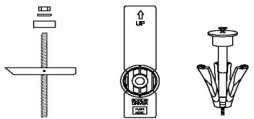
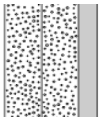


<b>Product</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R7424112

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8662 - Monteringsset, 10 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar R7424112	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	