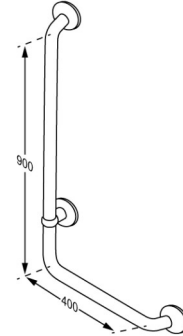




<b>Produkt</b>	PLUS 90° vinkelhåndgreb 400 x 900 mm
<b>Varenummer</b>	RT119112
<b>Farve</b>	Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:777567512 NRF:6311223 RSK:8980575 EAN:5708590318745 HMI: 25434 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866</p> <p>PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til øget selvhjulpethed.</p> <p>PLUS vinkelhåndgreb 90°, venstre, diameter 33 mm, A: 400 mm x B: 900 mm, til fastmontering. Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i grebet. Inkl vægroset, som skjuler monteringsskrueerne. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringsskrue til væg.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal belastning: 235 kg. Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 56 kg. <i>Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 17966:2016.</i></p>
<b>Materialer</b>	<p>Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycloy-plast Strop: Nylon (PA)</p>
<b>Ergonomi</b>	<p>Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.</p> <p>Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.</p>



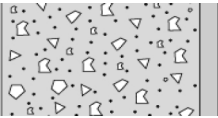


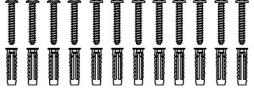
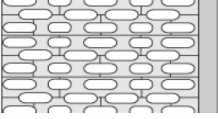

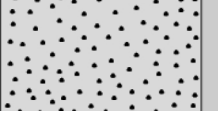

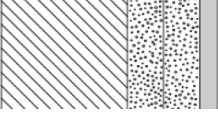



<b>Produkt</b>	PLUS 90° vinkelhåndgreb 400 x 900 mm
<b>Varenummer</b>	RT119112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

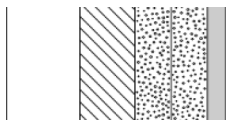
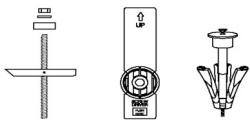

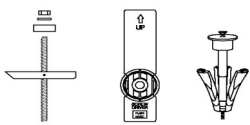
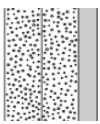


<b>Produkt</b>	PLUS 90° vinkelhåndgreb 400 x 900 mm
<b>Varenummer</b>	RT119112

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8667 - Monteringssæt, 12 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS 90° vinkelhåndgreb 400 x 900 mm RT119112	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (12 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (12 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	