




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS uppfällbar sits, manuellt höjdregerbar R5500112
Färg	VVS:777531712 NRF:7501063 EAN:5708590328249 HMI: 130162 FDA:INN/D135865 Antracitgrå
Beskrivning	 <p>PLUS uppfällbar sits, höjdregerbart 240 mm. Sitsen är uppfällbar. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej). Klappsits bör inte användas direkt i duschen.</p> <p>PLUS uppfällbar sits, höjdregerbart 240 mm. Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial. Exkl. lodrät väggskena.</p>
Justerbar Höjjustering	Höjdregerbar 240 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt: 265 kg När sitsan belastas med 265 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS uppfällbar sits testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material	Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

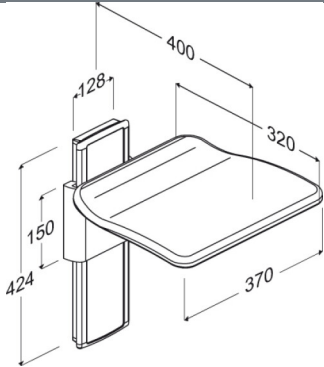

Product	PLUS uppfällbar sits, manuellt höjreglerbar
Varunummer	R5500112
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>