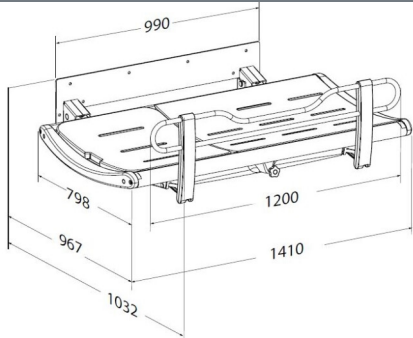




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret R8435313301
<b>Farve</b>	VVS: 777543143 EAN: 5708590374024 HMI: 130168 FDA: INT/D124320  Grafitgrå (RAL 7024)
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>SCT 3000 serien har et stilfuldt og prisbelønnet design med fokus på komfort og brugervenlighed.</p> <p>SCT 3000 bruseleje, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. sengehest, afløbsslange (Ø32 mm) og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Liggeflade 1300 mm, udvendige mål: 1032 mm x 1410 mm. Ekskl. monteringskraver til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fastmonteret  Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 210 kg. Når briksen belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 60 kg. <i>Briksen er testet statisk med 315 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
<b>Materialer</b>	Pulverlakeret rustfrit stål, aluminium, kunststof (PVC, polystyren). Puder i polyuretanskum, er testet i henhold til standarden DIN EN 1021-1 (flammebestandighed).



<b>Produkt</b>	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8435313301
<b>Ergonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren.</li><li>• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen.</li><li>• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.</li></ul>
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen (Ø32 mm) fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg.</li><li>• Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed.</li><li>• Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender.</li><li>• Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.</li></ul>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.

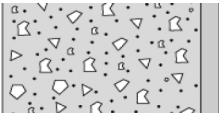
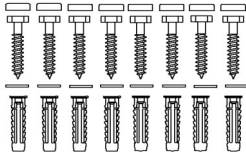

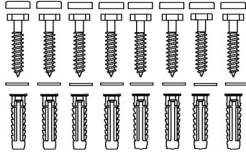
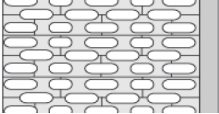
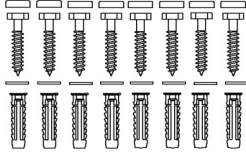
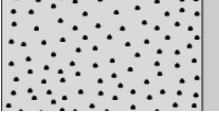
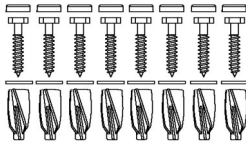
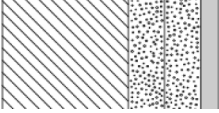
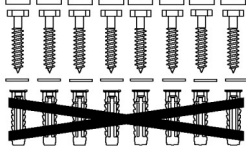


<b>Produkt</b>	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8435313301
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

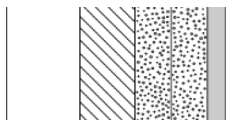
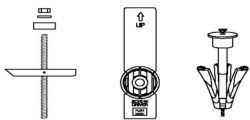
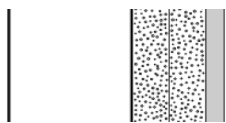
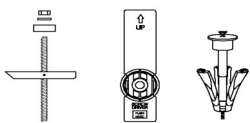
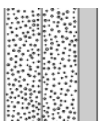



<b>Produkt</b>	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8435313301

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hz12</b> V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8663 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret R8435313301	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.