




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE II toiletsteun, vaste montage R1109000
Kleur	VVS:615891100 NRF:6191057 RSK:8487434 EAN:5708590367576 HMI: 123560 FDA: ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 VALUE II toiletsteun, vaste montage, opklapbaar, lengte 850 mm. Het ergonomische design heeft een veilige en comfortabele greep. Incl. bevestigingsbouten voor bakstenen muur. Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het wand type en moet apart besteld worden. VALUE II toiletsteun, vast montage, opklapbaar, lengte 850 mm. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele grip en een goed gevoel van waar de toiletsteun eindigt. Materialen: Rilsan gecoat staal, druk-gegoten aluminium, kunststof. Incl. bevestigingsbouten voor bakstenen muur. Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het wand type en moet apart besteld worden.
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 120 kg. Wanneer de toiletsteun belast wordt met 120 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 145 kg.
Materialen Ergonomy Functie	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. Geeft stevige ondersteuning bij zitten, opstaan of overstappen naar en van een toilet. Goed, breed steunvlak voor hand en arm. De afgeronde vorm geeft een stevige en comfortabele grip. De toiletsteun kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is of om meer ruimte te maken
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

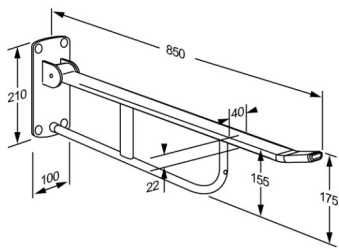






Product	VALUE II toiletsteun, vaste montage
Artikelnummer	R1109000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.








PRESSALIT®

Product	VALUE II toiletsteun, vaste montage
Artikelnummer	R1109000

Installatie in verschillende wandtypes

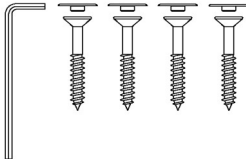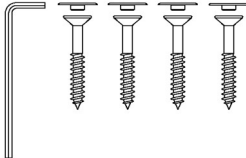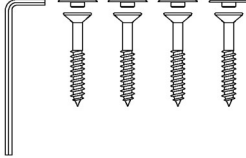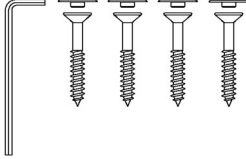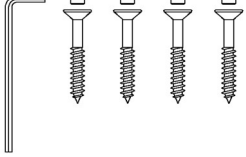	Betonwanden >B25 V8593 - 4 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8593 - 4 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8593 - 4 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8593 - 4 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8593 - 4 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	

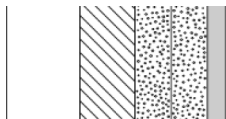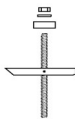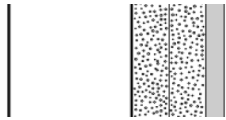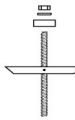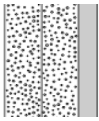

Product Artikelnummer	VALUE II toiletsteun, vaste montage R1109000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

Bolts for wall fixing are included. It is the responsibility of the installer to ensure that suitable plugs are used. Please see mounting instruction.