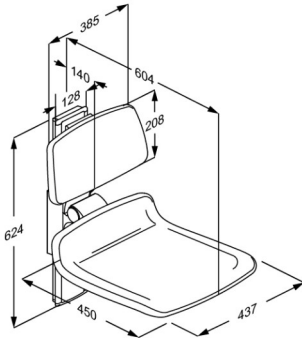




| | |
|---|---|
| Produkt Varenummer | PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart R7424035 |
| Farve | NRF:6317115 EAN:5708590359663 HMI: 124341 FDA:INN/D135865 Rød (RAL 3003) |
| Produktbeskrivelse |  <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS brusesæde 450, med ryglæn. Manuelt højderegulérbart 380 mm, uden brug af værktøj. Sæde er opklappeligt.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil.</p> <p>Ekskl. monteringskrue til væg. <i>Erstatter R7420</i></p> |
| Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet | Højderegulérbar 380 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 24 kg. <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p> |
| Materialer Ergonomi | Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS. <p>Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.</p> |

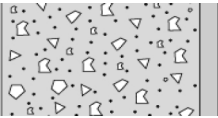
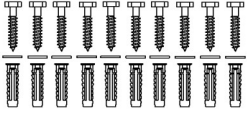

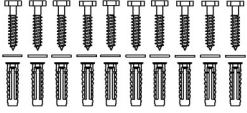
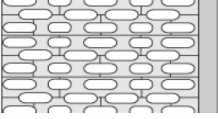
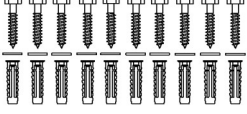
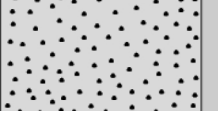
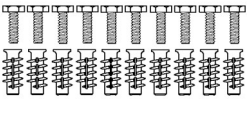
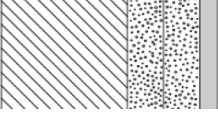
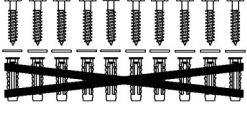


| | |
|-------------------|--|
| Produkt | PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulerbart |
| Varenummer | R7424035 |
| Funktioner | Sædet kan foldes op når det ikke er i brug. |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |
| Rengøring | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |

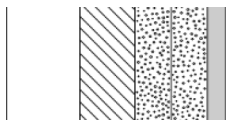
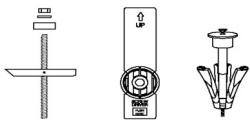
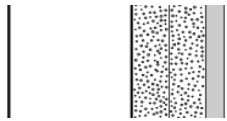
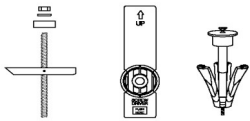
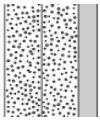
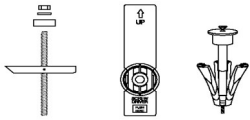


| | |
|-------------------|--|
| Produkt | PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulerbart |
| Varenummer | R7424035 |

Montering i forskellige vægtyper

| | | |
|---|---|---|
|  | Beton >B25 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat. |  |
|  | Kalksten >= H1z12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gasbeton P4 V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat. |  |



| | | |
|---|---|---|
| Produkt Varenummer | PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulerbart R7424035 | |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |  |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |  |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |  |