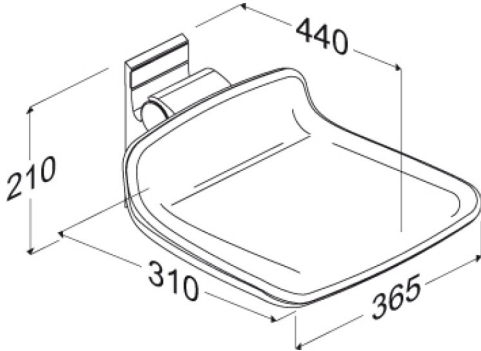




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 310, vaste montage. R7304108
Kleur	NRF:6317086 EAN:5708590359311 HMI: 121181 FDA:INN/D135865 Donkerblauw (RAL 5011)
Beschrijving	 Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar, en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS douchezitting 310. Voor vaste montage. De zitting is opklapbaar. Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel. Exclusief bevestigingsset. <i>Vervanger van R7310</i>
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg. Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 113 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Materialen Ergonomy Funktie	De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een in-mould gecoat oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharnieren cilinder is afgedekt met ABS. Ergonomisch ontworpen zitting - de contactoppervlakte is 310 x 365 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De zitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om het vloeroppervlakte te maximaliseren.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



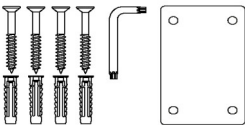
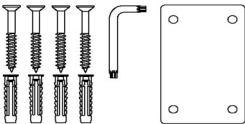
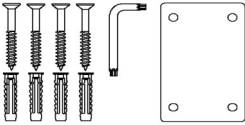
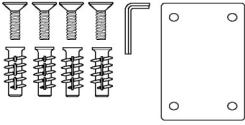
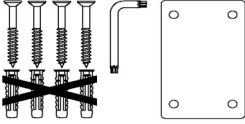
Product	PLUS douchezitting 310, vaste montage.
Artikelnummer	R7304108
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd. Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	PLUS douchezitting 310, vaste montage.
Artikelnummer	R7304108

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8654 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 310, vaste montage. R7304108		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.