




PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| Product Varunummer | PLUS uppfällbar sits, manuellt höjdregerbar R5500000 |
| Färg | VVS: 777531700 NRF: 7501062 EAN: 5708590328218 HMI: 130162 FDA: INN/D135865 Vit |
| Beskrivning |  <p>PLUS uppfällbar sits, höjdregerbart 240 mm. Sitsen är uppfällbar. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej). Klappsits bör inte användas direkt i duschen.</p> <p>PLUS uppfällbar sits, höjdregerbart 240 mm. Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial. Exkl. lodrät väggskena.</p> |
| Justerbar Höjjustering | Höjdregerbar 240 mm |
| Produktkapacitet | Max brukarvikt: 265 kg När sitsen belastas med 265 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS uppfällbar sits testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i> |
| Material | Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |

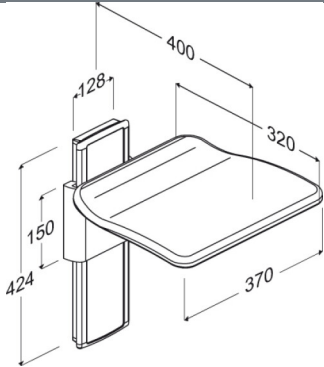

| | |
|-------------------|---|
| Product | PLUS uppfällbar sits, manuellt höjreglerbar |
| Varunummer | R5500000 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |