




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS ryggstöd, höjd- och sido reglerbart R6444277
Färg	NRF:6317054 EAN:5708590365558 HMI: 124205 FDA:INN/D135865 Limegrön
Beskrivning	 PLUS ryggstöd finns i flera färger och versioner, de finns både som fasta och justerbara. De är lämpliga för användning bakom en väghängd toalett utan cisternen eller för montering på en av Pressalits toalettlyftare. PLUS ryggstöd, 385 x 209 mm, vadderad. Höjdglerbart 150 mm och sidoreglerbart.för montering på vågrät PLUS väggskena bakom toalett utan cistern. Avtagbar utan verktyg och lätt att fästa igen. Material: Aluminium och mjukt perskum med tråkärna.Till montering på vågrät PLUS väggskena (ingår ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 150 mm Maximal belastning: 50 kg. Maximal användarvikt: 100 kg. När ryggstödet är belastat med 50 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 33 kg. <i>Ryggstödet bör kunna bära vikten hos en person som belastar ryggstödet.</i> Ryggstödet är inte personbärande och den testmetoder som föreskrivs för ryggstöd återspeglar detta: ISO 17966 kräver att ryggstöd testas statiskt med 50% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett ryggstöd är 50 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 100 kg belastar ryggstödet.
Funktioner	Till toalett utan cistern
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

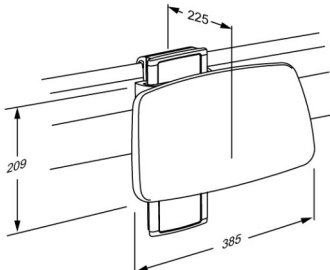

Product	PLUS ryggstöd, höjd- och sido reglerbart
Varunummer	R6444277
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-yltor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.