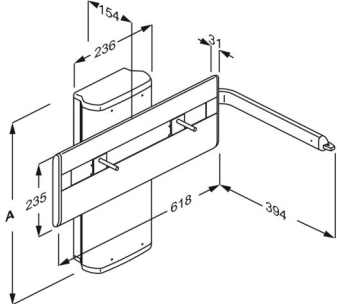




Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart R4750
Produktbeskrivelse	<p>VVS:654003110 NRF:6132534 RSK:7972592 EAN:5708590309309 HMI: 71761 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473</p>  <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng, vægmonteret. Elektrisk højderegulérbart 300 mm med betjeningsgreb. Betjeningsgrebet er placeret ved front af håndvask, det kan fungere som håndklædeholder og kan placeres på højre eller venstre side af vasken. Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE/NEW CURVE håndvaske). Materialer: Aluminium og ABS polymer. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maksimal belastning: 100 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 100 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 42 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 100 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 104 kg støtter sig til vasken.</p>



Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R4750
Hastighed opad	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 23 mm/s
Støjniveau	45 dB
Materialer	Vaskophængen er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endefærdighederne er fremstillet i ABS. Vaskophængen leveres med et betjeningsgreb, der består af en kontakt i ABS, der er placeret for enden af et fast greb i anodiseret aluminium.
Ergonomi	Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af betjeningsgrebet. Det er let og enkelt for en hjælper eller for en selvhjulpne bruger at indstille håndvasken til den ønskede højde. Vaskophængen passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
Funktioner	Betjeningsgreb er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder. Betjeningsgrebet er som standard placeret i højre side, men kan også placeres i venstre side.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Styreboks	SMPS14002
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

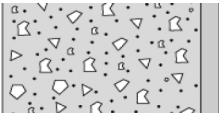
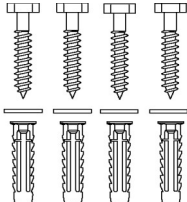

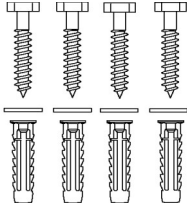
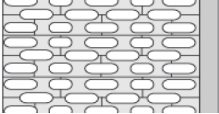
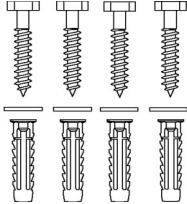
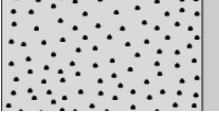
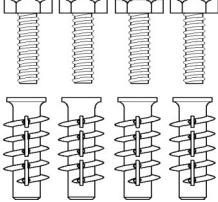
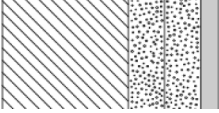
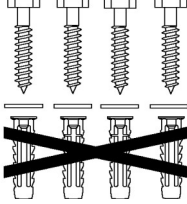


Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulerbart
Varenummer	R4750
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
Producent	Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Danmark Monteringsvejledninger, brugermanualer, CAD-filer, testprocedurer mm. kan downloades på www.pressalit.com .

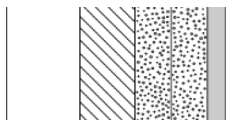
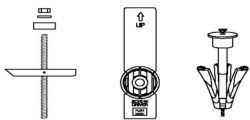
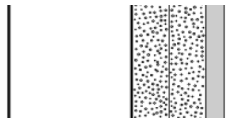
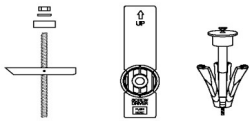
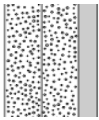


Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulerbart
Varenummer	R4750

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart R4750	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	