



<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R485219000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 654022800 NRF: 6132474 EAN: 5708590381060 HMI: 138121</p> <p>MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP vaskophæng, venstre, vægmonteret, med hvid installationsinddækning, inkl. til- og afløbssystem og vandlås (R2058). Elektrisk højderegulérbart 300 mm med trykknapper (i vask), og manuelt sideværts regulérbart 500 mm. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX ANGLE DEEP håndvaske, R2152/R2153). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren. Ekskl. monteringskruger til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højde- og sideværts regulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 60 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.</b></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 11,75 mm/s Hastighed ned: 11,75 mm/s



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R485219000
<b>Støjniveau</b>	50 dB
<b>Materialer</b>	Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LB40 HB
<b>Styreboks</b>	CA63
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 66 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

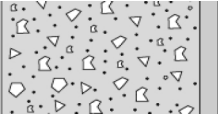
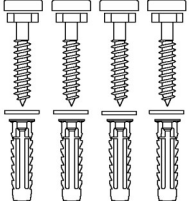

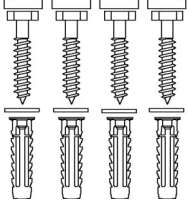
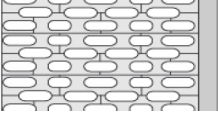
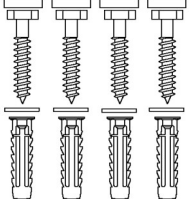
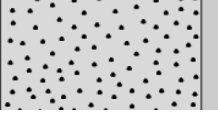
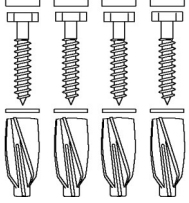
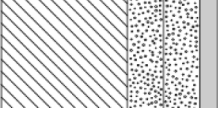
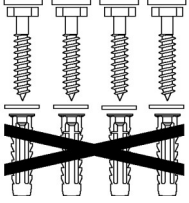


<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R485219000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

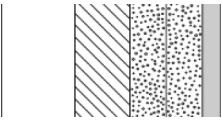
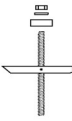


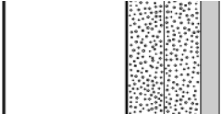
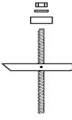


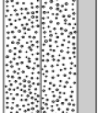
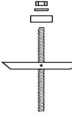




<b>Produkt</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R485219000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX elektrisk vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart R485219000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.