



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS håndgreb/brusestang 1000 x 1090 mm RT144112
Farve	VVS:777569702 NRF:6311236 RSK:8180965 EAN:5708590318806 HMI: 42068 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til øget selvhjulpenhed. PLUS håndgreb/brusestang, diameter 33 mm, udformet som omvendt T, A: 1000 x B: 1090 mm, til fastmontering. Kan kombineres med bruseholder RT600. Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i grebet. Inkl vægroset, som skjuler monteringskruerne. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringskruer til væg.
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 235 kg. Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 56 kg. <i>Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 17966:2016.</i>
Materialer	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cyclooy-plast Strop: Nylon (PA)
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS håndgreb/brusestang 1000 x 1090 mm
Varenummer	RT144112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

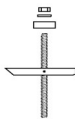
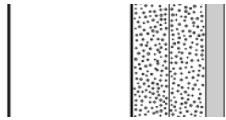
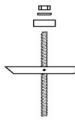
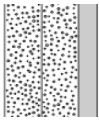
Produkt	PLUS håndgreb/brusestang 1000 x 1090 mm
Varenummer	RT144112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8667 - Monteringssæt, 12 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8617 - Monteringssæt, 12 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS håndgreb/brusestang 1000 x 1090 mm RT144112		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (12 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (12 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed.		

pressalit.com