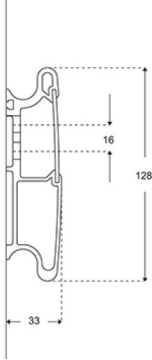




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS glissière-support, 900 mm R9809112
<b>Couleur</b>	Gris anthracite
<b>Description</b>	<p>VVS:615841109 NRF:7501014 EAN:5708590305752 HMI: 71740</p>  <p>PLUS glissière-support sert de suspension de barres de relèvement, sièges de douche et supports de lavabo, et rend possible le réglage latéral de ces produits. Veuillez trouver ci-dessous une sélection des produits qui peuvent être montés sur la glissière-support.</p> <p>PLUS glissière-support, 900 mm, pour montage horizontal. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Matériaux : aluminium et polystyrène. Livré sans vis de montage.</p>
<b>Réglage</b>	Montage fixe
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible : supporte - en fonction de l'état du mur - une charge maximale de 1000 kg maximum
<b>Matériaux</b>	La glissière-support est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, la plaque frontale est faite de polystyrène. Les extrémités sont recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS.
<b>Ergonomie</b>	Les glissières-support horizontales donnent de la flexibilité à l'aménagement. Les produits peuvent être décalés latéralement sur la glissière afin que leur positionnement respecte les impératifs d'espace, de soins et de manipulation.
<b>Fonctions</b>	Le poids de chaque produit de salle de bains est réparti sur toute la longueur de la glissière. Les produits peuvent être fixés sur la glissière avec fonctions de réglage et de verrouillage intuitives. La plaque frontale recouvre et protège les vis de montage et d'éventuels câbles.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



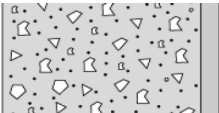
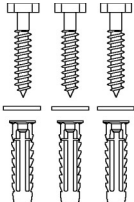

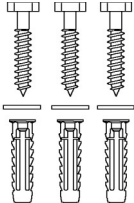
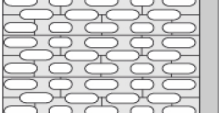
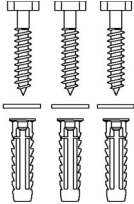
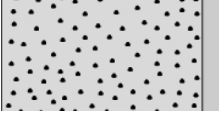
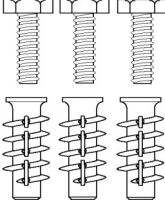
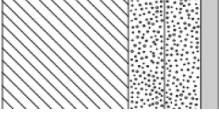
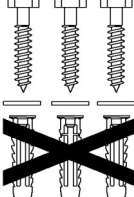
PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS glissière-support, 900 mm
<b>Numéro article</b>	R9809112
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Sufanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>
<b>Déclaration de conformité</b>	<p>Ce produit répond aux exigences pertinentes du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux dans la classe de risque I. Ce produit est considéré comme un <b>accessoire</b> de dispositif médical, car sans être lui-même un dispositif médical, il est destiné à être utilisé avec plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ces derniers conforme à leur destination.</p>



<b>Article</b>	PLUS glissière-support, 900 mm
<b>Numéro article</b>	R9809112

## Installation dans de différents types de mur

	<b>Béton &gt;B25</b> V8620 - Kit vis de montage, 3 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	<b>Brique pleine &gt;= Mz12</b> V8620 - Kit vis de montage, 3 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	<b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b> V8620 - Kit vis de montage, 3 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	<b>Béton cellulaire P4</b> V8670 - Kit vis de montage, 3 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b> V8620 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS glissière-support, 900 mm
<b>Numéro article</b>	R9809112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®