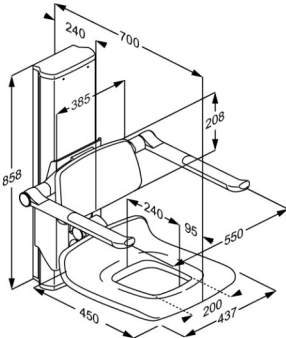




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart R7635112
<b>Farve</b>	Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777517112 NRF: 6317152 EAN: 5708590360249 HMI: 124326</p>  <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>Eldrebet PLUS brusesæde 450 med hul, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm, armlæn kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige.</p> <p>Ekskl. monteringskrue til væg. <i>Erstatter R7471</i></p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 61 kg.</p> <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 2,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 10 mm/s Hastighed ned: 10 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB



<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R7635112
<b>Materialer</b>	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
<b>Ergonomi</b>	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
<b>Funktioner</b>	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug. Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejds højde, mens brugeren sidder på sædet. Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
<b>Styreboks</b>	SMPS14 (Linak) IPX6
<b>Håndbetjening</b>	HB3 (Linak) IP66
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

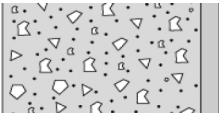
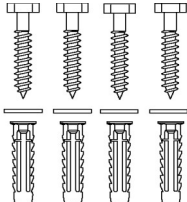

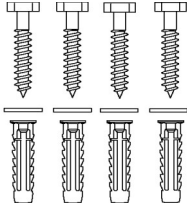
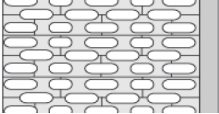
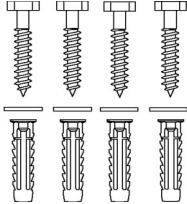
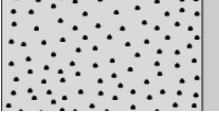
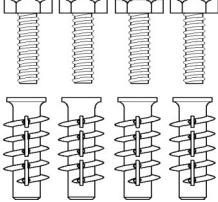
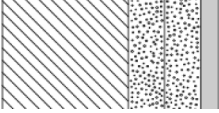
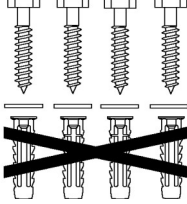


<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R7635112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvåttspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

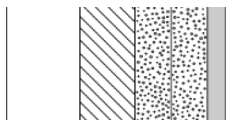
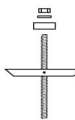

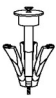
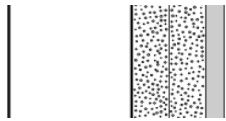
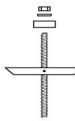


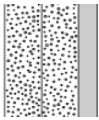


<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R7635112

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart R7635112	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	